

CONICT



 **INTRA-LOCK**
SYSTEM EUROPA



gli occhi sono
lo specchio dell'ANIMA
un SORRISO
è lo specchio del
CUORE




CONICT

L'IMPIANTO **IDEALE**
del **PRESENTE**
e del
FUTURO



TRATTAMENTO DI SUPERFICIE FHS

Fast Healing Surface: la velocità di guarigione di superficie.
FHS offre una struttura ideale per l'adesione dei fattori di crescita accelerando i tempi di osteointegrazione.

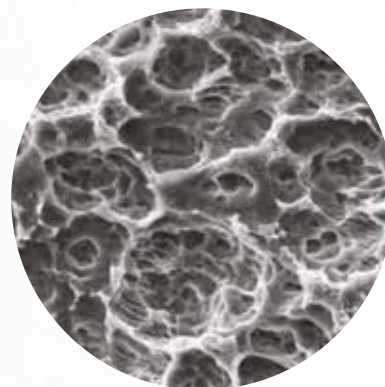

ARCHITETTURA **BCL**

Bone Chips Layering

L'impianto **CONIC CT** con spira BLC è ideale nei protocolli a carico immediato e in quelli tradizionali. Inoltre rende i protocolli immediati minimamente invasivi e predicibili in tutti i tipi di osso.



BISELLO A 45°

Consente il platform switching e la stabilizzazione del tessuto connettivo sopra crestale favorendo l'estetica e la stabilità ossea.



CONO MORSE 5°

Unica Connessione protesica tipo cono morse 5°

La connessione **CONIC CT**, tipo cono morse, è stata progettata per avere un perfetto sigillo antimicrobico e l'annullamento dei micromovimenti degli abutments.



FHS FAST HEALING SURFACE

LA VELOCITÀ DI GUARIGIONE DI SUPERFICIE

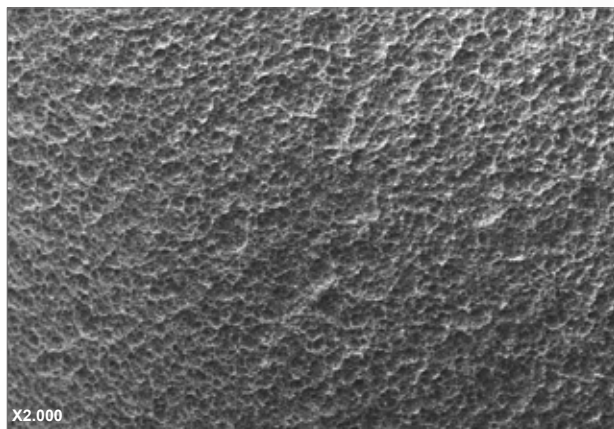


Fig.1 - Ingrandimento SEM che evidenziano la microrugosità di superficie

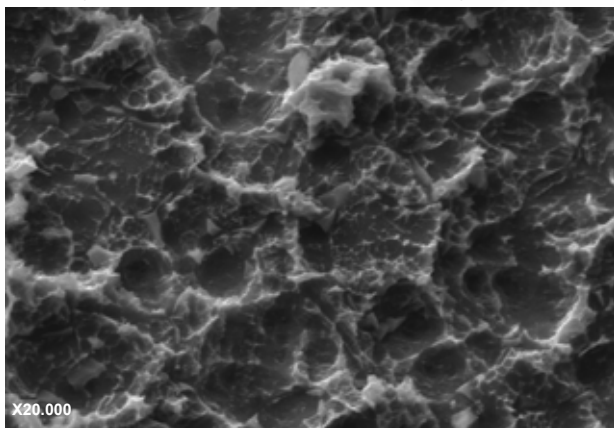


Fig.2 - Ingrandimento SEM che evidenziano la microrugosità di superficie



Fig.3 - Topografia Superficiale mediante SEM che evidenziano la superficie pulita senza residui.

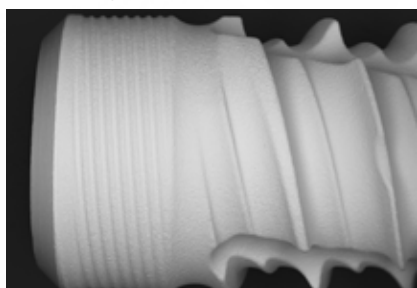


Fig.4

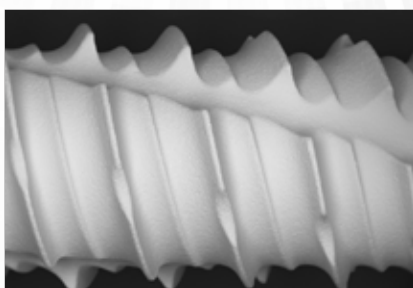


Fig.5

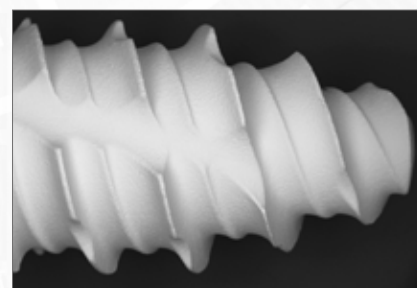


Fig.6

Immagini di Nobil Bio Ricerche

TRATTAMENTO DI SUPERFICIE

La superficie FHS è ottenuta con un processo di sabbiatura con rugosità a lungo raggio a cui viene sovrapposta una rugosità a corto raggio dovuta al trattamento di doppia acidificazione. Ciò permette di ottenere una microrugosità superficiale omogenea su tutta la superficie implantare (Fig. 1 e 2).

DECONTAMINAZIONE DELLA SUPERFICIE A PLASMA FREDDO

Questa topografia a “spugna” offre una struttura ideale per l’adesione dei fattori di crescita accelerando i tempi di osteointegrazione. Dopo i trattamenti di superficie, gli impianti vengono sottoposti ad un accurato processo di decontaminazione mediante plasma freddo innescato ad Argon GDT (Glow discharge treatment). Il GDT provoca la rimozione di ogni contaminante organico senza lasciare residui (vedi Fig. 3,4,5 e 6). Questa “sabbiatura atomica” attivando la ionizzazione degli atomi più superficiali dell’ossido di titanio aumenta l’energia di superficie e la bagnabilità della fixture.

Diametro del collo rastremato con micro filettature per ridurre lo stress e la compressione sulla corticale creatale facilitando un eventuale inserimento dell'impianto a livello sub-crestale



BCL con tre scarichi di deflusso:

- Distribuire e compattare i frustoli di osso nativo su tutta la superficie implantare
- Ridurre la compressione ossea
- Aumentare la stabilità primaria.

Filettatura apicale per un ancoraggio immediato e un'ottimale stabilità primaria

Bisello a 45° che consente il "platform switching" e la stabilizzazione del tessuto connettivo sovra crestale.

Nucleo dell'impianto con doppia conicità che consente il posizionamento in osso spongioso anche con osteotomie sottodimensionate.

Doppia filettatura con una spira che taglia e l'altra che compatta. Design delle spire sottile e progressivo per una elevata stabilità primaria e un inserimento facilitato.

Apice sferico e atraumatico con diametro ridotto appositamente disegnato per progredire nel sito implantare come un osteotomo.




UNICA CONNESSIONE PROTESICA

CONO MORSE 5°

8 POSIZIONI INDICIZZATE

BISELLO A 45°

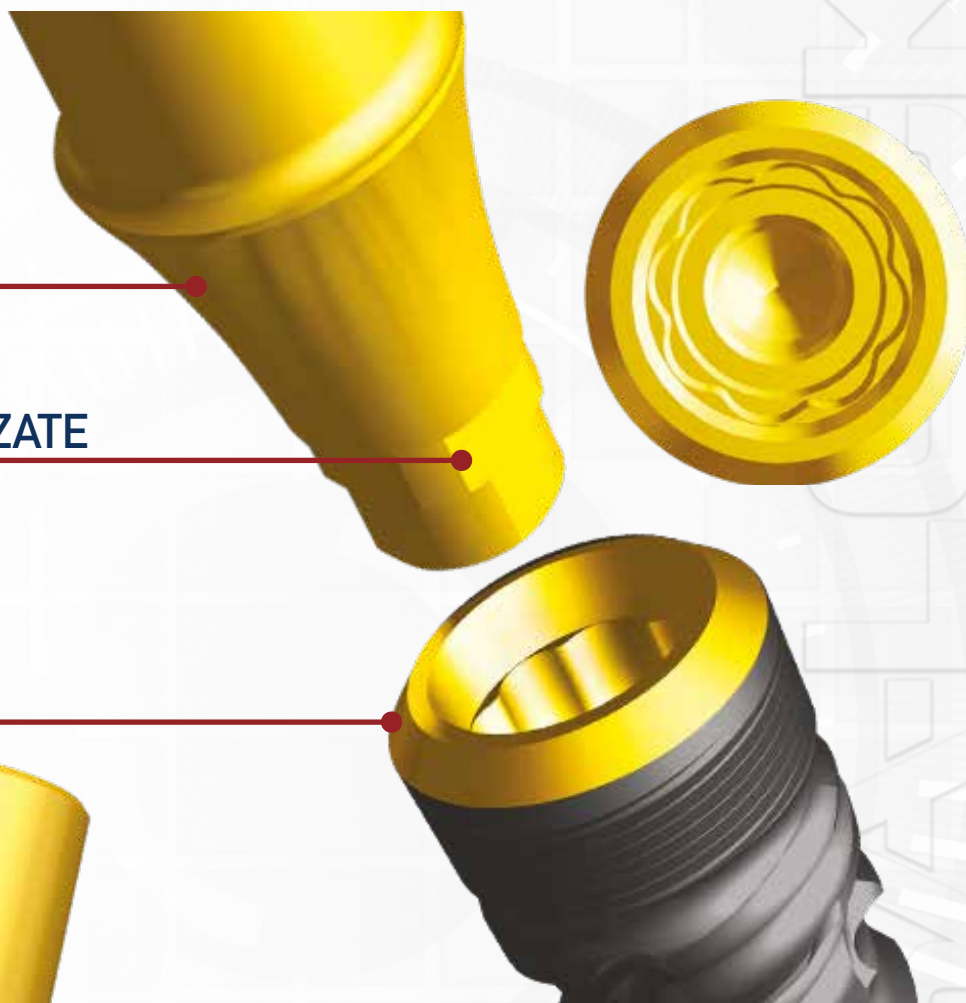

La connessione **CONIC CT** morse 5° è stata progettata per avere un perfetto sigillo moncone-impianto ottenendo, di fatto, una fusione fredda per creare un sigillo antimicrobico e assenza di svitamento viti dagli abutments.

Il bisello a 45° consente il platform switching e la stabilizzazione del tessuto connettivo sopra cretale favorendo la stabilità dei tessuti duri e molli nel corso degli anni, nonché l'estetica.

BCL

BONE CHIPS LAYERING

L'impianto **Conic CT** con spira **BCL** (Bone Chips Layering) è stato ideato per avere una elevata azione di taglio, distribuendo l'osso nativo su tutta la superficie implantare (*fig. 1*). La spira **BCL** e la morfologia dell'impianto **Conic CT**, riducono la compressione ossea per ottenere una stabilità primaria ottimale, rendendo predicibili e minimamente invasivi i protocolli a carico immediato.



fig. 1



L'impianto **Conic CT** con spira **BCL** è stato progettato con una spira e un'angolazione ideale per osso di tipo III e IV. Tali caratteristiche insieme ad un apice sferico, atraumatico con diametro ridotto, consentono osteotomie notevolmente sottodimensionate, rispetto al diametro dell'impianto, ottenendo una stabilità primaria ideale.

CONICT con spira **BCL**BCL
BONE CHIPS LAYERING

**Ottima stabilità
primaria anche in osso
spongioso**



- FUNGE DA OSTEOTOMO-ESPANSORE
- UNA SPIRA CHE TAGLIA INCREMENTALMENTE E UNA CHE COMPATTA
- APICE RIDOTTO

L'impianto **Conic CT BCL** ha una spira che taglia incrementalmente, aumentando la superficie di taglio, ottenendo sempre un'ottima stabilità primaria

Grazie alla doppia conicità, una spira che taglia, una che compatta e ad un apice ridotto, diventa, un impianto osteotomo-espansore, "site specific", in siti ossei di dimensioni minime.

PROTOCOLLO **SPLIT CREST**

Nei siti che hanno cresta ossea riassorbita orizzontalmente l'uso dell'impianto **CONIC CT** è ideale per evitare le classiche tecniche di split crest con scalpelli e osteotomi.

- 1 Preparare l'accesso alveolare con fresa diametro 2 mm per la lunghezza dell'impianto scelto.
- 2 Inserire l'impianto a contrangolo a 15 giri al minuto.
- 3 L'impianto stesso funge da osteomo-espansore, aumentando la dimensione orizzontale della cresta sino al suo completo alloggiamento.

LINEA CILINDRICA

3.4mmØ

Lunghezza	Descrizione prodotto	Protesica	Codice
8mm	3.4mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Conic	3408
10mm	3.4mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Conic	3410
11.5mm	3.4mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Conic	3411
13mm	3.4mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Conic	3413

Applicazioni: Osso tipo I e II, Incisivi Mascellari Laterali, Incisivi Mandibolari Centrali, Incisivi Mandibolari Laterali

Nota: L'impianto 3.4 monta solo la componentistica protesica CONIC

Nota: Non superare il torque di avvitamento di 60 Ncm



Vite Tappo inclusa

PASSAGGI
di FRESA
pg41



3.8mmØ

Lunghezza	Descrizione prodotto	Protesica	Codice
6,5mm	3.8mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Standard/Conic	3806
8mm	3.8mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Standard/Conic	3808
10mm	3.8mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Standard/Conic	3810
11.5mm	3.8mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Standard/Conic	3811
13mm	3.8mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Standard/Conic	3813
15mm	3.8mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Standard/Conic	3815

Applicazioni: Osso tipo I e II, Incisivi e Canini Mascellari e Mandibolari, Molari e Premolari Mascellari e Mandibolari

Nota: Non superare il torque di avvitamento di 60 Ncm



Vite Tappo inclusa

PASSAGGI
di FRESA
pg42



LINEA CILINDRICA

4.0mmØ

BCL
BONE CHIPS LAYERINGVite Tappo
inclusaPASSAGGI
di FRESA
pg43

Lunghezza	Descrizione prodotto	Protesica	Codice
6.5mm	4.0mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Standard/Conic	4006
8mm	4.0mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Standard/Conic	4008
10mm	4.0mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Standard/Conic	4010
11.5mm	4.0mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Standard/Conic	4011
13mm	4.0mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Standard/Conic	4013
15mm	4.0mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Standard/Conic	4015

Applicazioni: Osso tipo I e II, Incisivi Mascellari Lateral, Incisivi Mascellari Centrali, Incisivi Mandibolari Lateral, Post estrattivi

Nota: Non superare il torque di avvitamento di 60 Ncm

4.3mmØ

BCL
BONE CHIPS LAYERINGVite Tappo
inclusaPASSAGGI
di FRESA
pg44

Lunghezza	Descrizione prodotto	Protesica	Codice
6.5mm	4.3mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Standard/Conic	4306
8mm	4.3mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Standard/Conic	4308
10mm	4.3mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Standard/Conic	4310
11.5mm	4.3mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Standard/Conic	4311
13mm	4.3mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Standard/Conic	4313
15mm	4.3mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico	Standard/Conic	4315

Applicazioni: Osso tipo I e II, Incisivi Mascellari Lateral, Incisivi Mascellari Centrali, Incisivi Mandibolari Lateral, Post estrattivi

Nota: Non superare il torque di avvitamento di 60 Ncm

LINEA CONICA CT

3.75mmØ

Lunghezza	Descrizione prodotto	Protesica	Codice
8mm	3.7mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT3708
10mm	3.7mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT3710
11.5mm	3.7mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT3711
13mm	3.7mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT3713
15mm	3.7mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT3715

Applicazioni: Osso tipo III e IV, Incisivi Mascellari Lateral, Incisivi Mascellari Centrali, Incisivi Mandibolari Lateral, Post estrattivi, Procedura espansione creatale.

Nota: Non superare il torque di avvitamento di 60 Ncm



Vite Tappo inclusa



PASSAGGI
di **FRESA**
pg**45**



Vite Tappo inclusa

PASSAGGI
di **FRESA**
pg**46**

Lunghezza	Descrizione prodotto	Protesica	Codice
8mm	4.0mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT4008
10mm	4.0mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT4010
11.5mm	4.0mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT4011
13mm	4.0mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT4013
15mm	4.0mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT4015

Applicazioni: Osso tipo III e IV, Incisivi Mascellari Lateral, Incisivi Mascellari Centrali, Incisivi Mandibolari Lateral, Post estrattivi, Procedura espansione creatale.

Nota: Non superare il torque di avvitamento di 60 Ncm



Vite Tappo inclusa



PASSAGGI
di **FRESA**
pg**47**

4.75mmØ

Lunghezza	Descrizione prodotto	Protesica	Codice
8mm	4.7mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT4708
10mm	4.7mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT4710
11.5mm	4.7mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT4711
13mm	4.7mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT4713

Applicazioni: Osso tipo III e IV, Canini Mascellari, Molari e Premolari Mascellari, Canini Mandibolari, Molari e Premolari Mandibolari

Nota: Non superare il torque di avvitamento di 60 Ncm
L'impianto Ø 4.75mm monta la componentistica protesica Conic, Standard e quella Gold Piattaforma GW

CONICT

PRO

**Linea Conic CT PRO**

Diametro del collo rastremato con micro filettature per ridurre lo stress e la compressione sulla corticale crestale facilitando un eventuale inserimento dell'impianto a livello sub-crestale.



LINEA CONIC CT PRO

3.75mmØ

Lunghezza	Descrizione prodotto	Protesica	Codice
8mm	3.7mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT3708P
10mm	3.7mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT3710P
11.5mm	3.7mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT3711P
13mm	3.7mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT3713P
15mm	3.7mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT3715P

Applicazioni: Incisivi Mascellari Lateral, Incisivi Mascellari Centrali,
Incisivi Mandibolari Lateral, Post estrattivi, Procedura espansione crestale.

Nota: Non superare il torque di avvitamento di 60 Ncm



Vite Tappo inclusa

PASSAGGI
di FRESA
pg50



Vite Tappo inclusa

PASSAGGI
di FRESA
pg49



4.0mmØ

Lunghezza	Descrizione prodotto	Protesica	Codice
8mm	4.0mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT4008P
10mm	4.0mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT4010P
11.5mm	4.0mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT4011P
13mm	4.0mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT4013P
15mm	4.0mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT4015P

Applicazioni: Osso tipo III e IV, Post estrattivi e Procedura espansione crestale.

Nota: Non superare il torque di avvitamento di 60 Ncm



Vite Tappo inclusa

PASSAGGI
di FRESA
pg50



Vite Tappo inclusa

PASSAGGI
di FRESA
pg51



4.75mmØ

Lunghezza	Descrizione prodotto	Protesica	Codice
8mm	4.7mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT4708P
10mm	4.7mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT4710P
11.5mm	4.7mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT4711P
13mm	4.7mm Diametro, BCL® Corpo Conico	Standard/Conic	CT4713P

Applicazioni: Canini Mascellari, Molari e Premolari Mascellari
Canini Mandibolari, Molari e Premolari Mandibolari

Nota: Non superare il torque di avvitamento di 60 Ncm



Vite Tappo inclusa

PASSAGGI
di FRESA
pg51



NEW

CONICT[®] Plus



Nuova linea **Conic Plus** maggiore versatilità al sistema **INTRA-LOCK**.

L'impianto **CONIC Plus** si differenzia dal modello **Conic** per il suo collo interamente trattato, rendendolo ideale per i clinici che prediligono la tecnica sommersa.

Disponibile sia per la linea cilindrica che CT.



LINEA CILINDRICA **Plus**

3.4mmØ



Plus

Lunghezza	Descrizione prodotto	Protesica	Codice
8mm	3.4mm Ø, BCL® Corpo Cilindrico - Full Treatment	Conic	3408PFT
10mm	3.4mm Ø, BCL® Corpo Cilindrico - Full Treatment	Conic	3410PFT
11.5mm	3.4mm Ø, BCL® Corpo Cilindrico - Full Treatment	Conic	3411PFT
13mm	3.4mm Ø, BCL® Corpo Cilindrico - Full Treatment	Conic	3413PFT



Vite Tappo inclusa

Applicazioni: Osso tipo I e II, Incisivi Mascellari Lateral, Incisivi Mandibolari Centrali, Incisivi Mandibolari Lateral

Nota: L'impianto 3.4 monta solo la componentistica protesica CONIC

Nota: Non superare il torque di avvitamento di 60 Ncm

PASSAGGI
di FRESA
pg41



3.8mmØ



Plus

Lunghezza	Descrizione prodotto	Protesica	Codice
6,5mm	3.8mm Ø, BCL® Corpo Cilindrico - Full Treatment	Standard/Conic	3806PFT
8mm	3.8mm Ø, BCL® Corpo Cilindrico - Full Treatment	Standard/Conic	3808PFT
10mm	3.8mm Ø, BCL® Corpo Cilindrico - Full Treatment	Standard/Conic	3810PFT
11.5mm	3.8mm Ø, BCL® Corpo Cilindrico - Full Treatment	Standard/Conic	3811PFT
13mm	3.8mm Ø, BCL® Corpo Cilindrico - Full Treatment	Standard/Conic	3813PFT
15mm	3.8mm Ø, BCL® Corpo Cilindrico - Full Treatment	Standard/Conic	3815PFT



Vite Tappo inclusa

Applicazioni: Osso tipo I e II, Incisivi e Canini Mascellari e Mandibolari. Molari e Premolari Mascellari e Mandibolari

Nota: Non superare il torque di avvitamento di 60 Ncm

PASSAGGI
di FRESA
pg42



LINEA CILINDRICA **Plus****Plus****4.0mmØ**Vite Tappo
inclusaPASSAGGI
di FRESA
pg**43**

Lunghezza	Descrizione prodotto	Protesica	Codice
6.5mm	4.0mm Ø, BCL [®] Corpo Cilindrico - Full Treatment	Standard/Conic	4006PFT
8mm	4.0mm Ø, BCL [®] Corpo Cilindrico - Full Treatment	Standard/Conic	4008PFT
10mm	4.0mm Ø, BCL [®] Corpo Cilindrico - Full Treatment	Standard/Conic	4010PFT
11.5mm	4.0mm Ø, BCL [®] Corpo Cilindrico - Full Treatment	Standard/Conic	4011PFT
13mm	4.0mm Ø, BCL [®] Corpo Cilindrico - Full Treatment	Standard/Conic	4013PFT
15mm	4.0mm Ø, BCL [®] Corpo Cilindrico - Full Treatment	Standard/Conic	4015PFT

Applicazioni: Osso tipo I e II, Incisivi Mascellari Lateral, Incisivi Mascellari Centrali, Incisivi Mandibolari Lateral, Post estrattivi

Nota: Non superare il torque di avvitamento di 60 Ncm

**Plus****4.3mmØ**Vite Tappo
inclusaPASSAGGI
di FRESA
pg**44**

Lunghezza	Descrizione prodotto	Protesica	Codice
6.5mm	4.3mm Ø, BCL [®] Corpo Cilindrico - Full Treatment	Standard/Conic	4306PFT
8mm	4.3mm Ø, BCL [®] Corpo Cilindrico - Full Treatment	Standard/Conic	4308PFT
10mm	4.3mm Ø, BCL [®] Corpo Cilindrico - Full Treatment	Standard/Conic	4310PFT
11.5mm	4.3mm Ø, BCL [®] Corpo Cilindrico - Full Treatment	Standard/Conic	4311PFT
13mm	4.3mm Ø, BCL [®] Corpo Cilindrico - Full Treatment	Standard/Conic	4313PFT
15mm	4.3mm Ø, BCL [®] Corpo Cilindrico - Full Treatment	Standard/Conic	4315PFT

Applicazioni: Osso tipo I e II, Incisivi Mascellari Lateral, Incisivi Mascellari Centrali, Incisivi Mandibolari Lateral, Post estrattivi

Nota: Non superare il torque di avvitamento di 60 Ncm

LINEA CONIC CT **PRO Plus**

3.75mmØ



Plus

Lunghezza	Descrizione prodotto	Protesica	Codice
8mm	3.7mm Ø, BCL® Corpo Conico - Full Treatment	Standard/Conic	CT3708PFT
10mm	3.7mm Ø, BCL® Corpo Conico - Full Treatment	Standard/Conic	CT3710PFT
11.5mm	3.7mm Ø, BCL® Corpo Conico - Full Treatment	Standard/Conic	CT3711PFT
13mm	3.7mm Ø, BCL® Corpo Conico - Full Treatment	Standard/Conic	CT3713PFT
15mm	3.7mm Ø, BCL® Corpo Conico - Full Treatment	Standard/Conic	CT3715PFT



Vite Tappo inclusa

Applicazioni: Osso tipo III e IV, Incisivi Mascellari Lateral, Incisivi Mascellari Centrali, Incisivi Mandibolari Lateral, Post estrattivi, Procedura espansione crestale.

Nota: Non superare il torque di avvitamento di 60 Ncm



Plus



Vite Tappo inclusa

PASSAGGI
di FRESA
pg50

PASSAGGI
di FRESA
pg49



4.0mmØ

Lunghezza	Descrizione prodotto	Protesica	Codice
8mm	4.0mm Ø, BCL® Corpo Conico - Full Treatment	Standard/Conic	CT4008PFT
10mm	4.0mm Ø, BCL® Corpo Conico - Full Treatment	Standard/Conic	CT4010PFT
11.5mm	4.0mm Ø, BCL® Corpo Conico - Full Treatment	Standard/Conic	CT4011PFT
13mm	4.0mm Ø, BCL® Corpo Conico - Full Treatment	Standard/Conic	CT4013PFT
15mm	4.0mm Ø, BCL® Corpo Conico - Full Treatment	Standard/Conic	CT4015PFT

Applicazioni: Osso tipo III e IV, Post estrattivi e Procedura espansione crestale.

Nota: Non superare il torque di avvitamento di 60 Ncm



Vite Tappo inclusa

PASSAGGI
di FRESA
pg50



Plus



Vite Tappo inclusa

4.75mmØ

Lunghezza	Descrizione prodotto	Protesica	Codice
8mm	4.7mm Ø, BCL® Corpo Conico - Full Treatment	Standard/Conic	CT4708PFT
10mm	4.7mm Ø, BCL® Corpo Conico - Full Treatment	Standard/Conic	CT4710PFT
11.5mm	4.7mm Ø, BCL® Corpo Conico - Full Treatment	Standard/Conic	CT4711PFT
13mm	4.7mm Ø, BCL® Corpo Conico - Full Treatment	Standard/Conic	CT4713PFT

Applicazioni: Osso tipo III e IV, Canini Mascellari, Molari e Premolari Mascellari, Canini Mandibolari, Molari e Premolari Mandibolari

Nota: Non superare il torque di avvitamento di 60 Ncm



Plus



Vite Tappo inclusa

PASSAGGI
di FRESA
pg51



SISTEMA PROTESICO CONIC

VITE TAPPO



C-ICS2

Altezza	Descrizione prodotto	Codice
2mm	Vite Tappo	C-ICS2

VITE DI GUARIGIONE



C-HA2



C-HAW2

Altezza	Diametro	Descrizione prodotto	Codice
2.5mm	4,0mm	Vite di Guarigione	C-HA2
3.5mm	4,0mm	Vite di Guarigione	C-HA3
5.5mm	4,0mm	Vite di Guarigione	C-HA5
2.5mm	5,5mm	Vite di Guarigione Wide	C-HAW2
3.5mm	5,5mm	Vite di Guarigione Wide	C-HAW3
5.5mm	5,5mm	Vite di Guarigione Wide	C-HAW5

TRANSFER



C-TRSO



C-ALS2



IH-TC



C-OTT



C-ALS

Descrizione prodotto	Codice
Transfer Abutment Snap-On con Vite corta	C-TRSO
Vite lunga opzionale	C-ALS2
Cappetta opzionale	IH-TC

Descrizione prodotto	Codice
Transfer per cucchiaio individuale con Vite lunga	C-OTT
Vite lunga per Transfer a ricambio	C-ALS

ANALOGO



C-LAD



SAA


Descrizione prodotto	Codice
Analogo universale	C-LAD
Vite per Analogo-opzionale	SAA

SISTEMA PROTESICO CONIC

ABUTMENT DIRITTO CON VITE PASSANTE

Altezza		Descrizione prodotto	Codice
1.5mm	Non rotante	Abutment diritto con Vite di Ritenzione	C-SA1
2.5mm	Non rotante	Abutment diritto con Vite di Ritenzione	C-SA2
3.5mm	Non rotante	Abutment diritto con Vite di Ritenzione	C-SA3
5.5mm	Non rotante	Abutment diritto con Vite di Ritenzione	C-SA5
Altezza		Descrizione prodotto	Codice
2.5mm	Rotante	Abutment diritto con Vite di Ritenzione	C-SA2R
3.5mm	Rotante	Abutment diritto con Vite di Ritenzione	C-SA3R
5.5mm	Rotante	Abutment diritto con Vite di Ritenzione	C-SA5R

Torque finale 25 Ncm

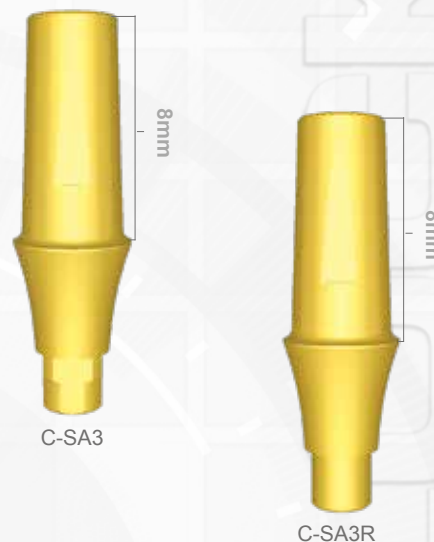

ABUTMENT DIRITTO WIDE

Altezza		Descrizione prodotto	Codice
1.5mm	Non rotante	Abutment diritto Wide con Vite di Ritenzione	C-SAW1
2.5mm	Non rotante	Abutment diritto Wide con Vite di Ritenzione	C-SAW2
3.5mm	Non rotante	Abutment diritto Wide con Vite di Ritenzione	C-SAW3
5.5mm	Non rotante	Abutment diritto Wide con Vite di Ritenzione	C-SAW5

Torque finale 25 Ncm




ABUTMENT ANGOLATO CON VITE PASSANTE

Altezza		Descrizione prodotto	Codice
1.5mm	15°	Abutment angolato 15° con Vite di Ritenzione	C-SA15-1
2.5mm	15°	Abutment angolato 15° con Vite di Ritenzione	C-SA15-2
3.5mm	15°	Abutment angolato 15° con Vite di Ritenzione	C-SA15-3

Altezza		Descrizione prodotto	Codice
1.5mm	25°	Abutment angolato 25° con Vite di Ritenzione	C-SA25-1
2.5mm	25°	Abutment angolato 25° con Vite di Ritenzione	C-SA25-2
3.5mm	25°	Abutment angolato 25° con Vite di Ritenzione	C-SA25-3

Torque finale 25 Ncm

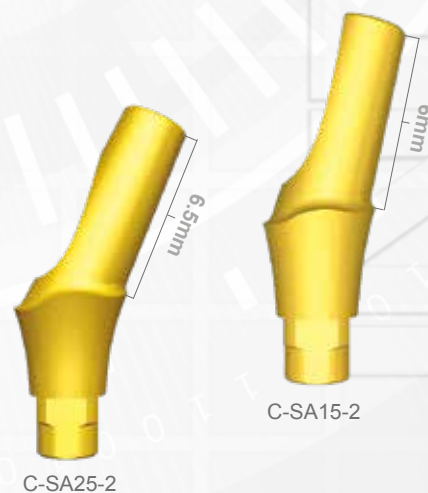

SISTEMA PROTESICO CONIC

ABUTMENT DUE PEZZI



C-CACCNR

Descrizione prodotto

Abutment Calcinabile con base in Cromo cobalto e Vite di Ritenzione

Non rotante

Codice

C-CACCNR



C-CACCR

Descrizione prodotto

Abutment Calcinabile con base in Cromo cobalto e Vite di Ritenzione

Rotante

Codice

C-CACCR

ABUTMENT DUE PEZZI IN CROMO COBALTO



C-CCCNR

Altezza**Descrizione prodotto****Codice**

1,5mm

Cilindro in Cromo cobalto con Vite di Ritenzione

Non rotante

C-CCCNR

2,5mm

Cilindro in Cromo cobalto con Vite di Ritenzione

Non rotante

C-CCCNR2



C-CCCR

Altezza**Descrizione prodotto****Codice**

1,5mm

Cilindro in Cromo cobalto con Vite di Ritenzione

Rotante

C-CCCR

2,5mm

Cilindro in Cromo cobalto con Vite di Ritenzione

Rotante

C-CCCR2

SISTEMA PROTESICO CONIC

ABUTMENT A PALLA

Altezza	Descrizione prodotto	Codice
1mm	Abutment a palla - incluso box in metallo e oring	C-BA1
2mm	Abutment a palla - incluso box in metallo e oring	C-BA2
3mm	Abutment a palla - incluso box in metallo e oring	C-BA3
4mm	Abutment a palla - incluso box in metallo e oring	C-BA4

Descrizione prodotto	Codice
Analogo per Abutment a palla	OBA
O-Ring ricambio per BBA	ORB
Box in metallo per Abutment a Palla	BBA
O-Ring ricambio piccolo per BBAS	ORBS
Box in metallo piccolo per Abutment a Palla	BBAS



C-BA3

OBA

ORB

BBA

ORBS


BBAS

MONCONE IN-LOC

Altezza	Descrizione prodotto	Codice
1mm	In-Loc Abutment - incluso posizionatore	C-LOC1
2mm	In-Loc Abutment - incluso posizionatore	C-LOC2
3mm	In-Loc Abutment - incluso posizionatore	C-LOC3
4mm	In-Loc Abutment - incluso posizionatore	C-LOC4

Descrizione prodotto	Codice
Confezione Cappette da 4pz. a ricambio	ILP01
Ritenzione Nylon Pink 3 LB (4 pezzi)	ILP03
Ritenzione Nylon angolati arancione 2 LB (4 pezzi)	ILP02A
Ritenzione Nylon angolati verde 4 LB (4 pezzi)	ILP04A

Descrizione prodotto	Codice
Inseritore per Nylon In-Loc	IL-IN
Driver Contrangolo per In-Loc	IL-CAD
Driver Manuale per In-Loc	IL-DM

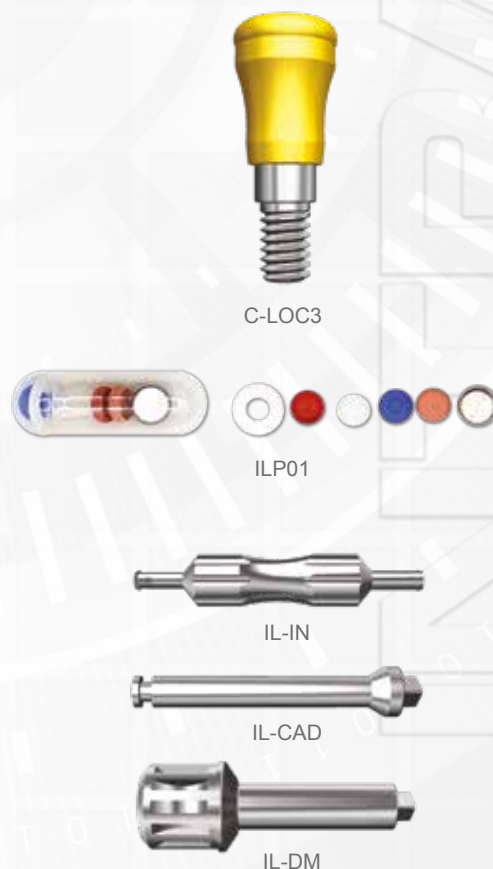

C-LOC3

ILP01

IL-IN

IL-CAD

IL-DM

SISTEMA PROTESICO CONIC

SOLUZIONI DIGITALI



C-SB



C-LAD



SAA



C-LIT3NR



C-LIT3



C-TIBASE2



C-TIBASE2R

Descrizione prodotto

Scan body Conic con Vite da laboratorio

Codice

C-SB

Descrizione prodotto

Analogo per Cad-cam

Codice

C-LAD

Vite per Analogo-opsionale

SAA

Altezza		Descrizione prodotto	Codice
1.5mm	Non rotante	Link incollaggio in titanio con Vite	C-LIT1NR
2.5mm	Non rotante	Link incollaggio in titanio con Vite	C-LIT2NR
3.5mm	Non rotante	Link incollaggio in titanio con Vite	C-LIT3NR
5.5mm	Non rotante	Link incollaggio in titanio con Vite	C-LIT5NR

Altezza		Descrizione prodotto	Codice
1.5mm	Rotante	Link incollaggio in titanio con Vite	C-LIT1R
2.5mm	Rotante	Link incollaggio in titanio con Vite	C-LIT2R
3.5mm	Rotante	Link incollaggio in titanio con Vite	C-LIT3R
5.5mm	Rotante	Link incollaggio in titanio con Vite	C-LIT5R

Altezza		Descrizione prodotto	Codice
1.5mm	Non rotante	TiBase in titanio con Vite	C-TIBASE1
2.5mm	Non rotante	TiBase in titanio con Vite	C-TIBASE2
3.5mm	Non rotante	TiBase in titanio con Vite	C-TIBASE3

Altezza		Descrizione prodotto	Codice
1.5mm	Rotante	TiBase in titanio con Vite	C-TIBASE1R
2.5mm	Rotante	TiBase in titanio con Vite	C-TIBASE2R
3.5mm	Rotante	TiBase in titanio con Vite	C-TIBASE3R

TiBase per realizzare protesi in ceramica con il sistema di incollaggio Sirona[®] CEREC[®].

Indicazioni per Scanner Sirona[®]: Per una corretta procedura sarà necessario inserire sul TiBase lo Scan-Body grigio (Grey Cat. # 6431329) o bianco (White Cat. # 6431303) a seconda della tipologia di scanner, assicurandosi che lo slot interno, per la procedura guidata, sia allineato con la posizione del TiBase.

Per il settaggio del software CAD della Sirona[®]: impostare i parametri dello Zimmer ZTSV3.5L



TiBase posizionato
sull'analogo nel modello



ScanBody posizionato
correttamente sul TiBase

MUA

ABUTMENT MUA CONIC

Altezza	Descrizione prodotto	Codice
1mm	Abutment Mua diritto	C-MUD1
2mm	Abutment Mua diritto	C-MUD2
3mm	Abutment Mua diritto	C-MUD3
17°	Abutment Mua Angolato 17° con posizionatore	C-CAA17
30°	Abutment Mua Angolato 30° con posizionatore	C-CAA30



C-MUD1



C-CAA17



C-CAA30

CILINDRI MUA

Descrizione prodotto	Codice
Cilindro Mua Calcinabile con vite	M-CA
Cilindro Mua in Titanio con vite	M-TA



M-CA



M-TA

TRANSFER E ANALOGO MUA

Descrizione prodotto	Codice
Transfer Mua con Vite lunga	M-AOTT
Analogo Mua	M-AA
Cappetta di guarigione	M-ACS



M-AOTT



M-AA



M-ACS

DIGITALE

Descrizione prodotto	Codice
Analogo digitale per Mua	M-AAD
Vite per analogo-opzionale	SAA
Link Abutment con Vite	M-LK
Scan Body con Vite	M-SB



M-AAD



SAA



M-LK



M-SB

On-Flat ABUTMENTS SYSTEM

On-Flat è un abutment protesico che permette di ottenere la massima precisione di connessione tra impianto e moncone e nello stesso tempo di eliminare ogni interferenza garantendo la completa passivazione, della struttura avvitata, tra gli impianti qualunque sia il grado di disparallelismo.



CONNESSIONE INTERNA

Nella pratica clinica è spesso necessario, allo scopo di ottenere una stabilità primaria ottimale, inserire gli impianti con una inclinazione, talvolta anche importante. Grazie all'uso dell'**On-Flat** Abutment è possibile realizzare la protesi senza ausili differenti quali sono i monconi angolati o altri artifici protesici. In queste immagini si può apprezzare come, sia in presenza di connessione implantare interna che esterna, è sufficiente un impianto disparallelo per impedire la congruità e la precisione del manufatto protesico.



CONNESSIONE **ESTERNA**



Le immagini riferite all'uso dell'**On-Flat** Abutment, invece, dimostrano la precisione della fusione protesica pur in presenza di quattro impianti tutti fortemente disparalleli.



grave **disparallelismo**
risolto grazie al
On-Flat

SISTEMA ON-FLAT

ABUTMENT ON-FLAT CONIC



OFC-A2R

Altezza	Diametro		Descrizione prodotto	Codice
1.5mm	3.5mm	Rotante	Moncone Conic	OFC-A1R
2.5mm	3.5mm	Rotante	Moncone Conic	OFC-A2R
3.5mm	3.5mm	Rotante	Moncone Conic	OFC-A3R
4.5mm	3.5mm	Rotante	Moncone Conic	OFC-A4R

ABUTMENT ON-FLAT CONIC ANGOLATO



OFC-AA20R



OFC-AA30R

Diametro		Descrizione prodotto	Codice
3.5mm	Rotante	Abutment angolato 20° con Vite	OFC-AA20R

Diametro		Descrizione prodotto	Codice
3.5mm	Rotante	Abutment angolato 30° con Vite	OFC-AA30R

VITI DI GUARIGIONE



OF-HA3530



OF-HA3545



OF-HA3560

Altezza	Diametro	Descrizione prodotto	Codice
3mm	3.5mm	Vite di Guarigione estetica, Narrow	OF-HA3530
4.5mm	3.5mm	Vite di Guarigione estetica, Narrow	OF-HA3545
6mm	3.5mm	Vite di Guarigione estetica, Narrow	OF-HA3560

CILINDRI ON FLAT



OF-ANPC

Diametro		Descrizione prodotto	Codice
3.5mm	Rotante	Calcinabile Narrow con Vite di Ritenzione	OF-ANPC

CILINDRI ON FLAT IN CROMO COBALTO



OF-ANCCC

Diametro		Descrizione prodotto	Codice
3.5mm	Rotante	Moncone in Cromo Cobalto Narrow con Vite di Ritenzione	OF-ANCCC

SISTEMA ON-FLAT

LINK DA INCOLLAGGIO IN TITANIO


Diametro		Descrizione prodotto	Codice
3.5mm	Rotante	Cilindro in Titanio Narrow - Link da incollaggio con Vite di Ritenzione	OF-ANTC



OF-ANTC

ABUTMENT PER INCOLLAGGIO

Diametro	Descrizione prodotto	Codice
3.5mm	Abutment Calcinabile corto con Analogo in Peek, Narrow	OF-PCPN

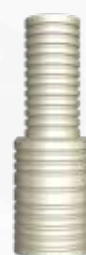

OF-PCPN



OF-STN

Diametro	Descrizione prodotto	Codice
3.5mm	Link di incollaggio corto in Titanio con Vite, Narrow	OF-STN

TRANSFER

Diametro	Descrizione prodotto	Codice
3.5mm	Transfer Cucchiaino aperto, Narrow, con Vite lunga	OF-ONT
	Vite lunga per Transfer a ricambio	OF-ALS



OF-ONT



OF-ALS

Diametro	Descrizione prodotto	Codice
3.5mm	Transfer Cucchiaino chiuso, Narrow, con Vite corta	OF-ANT
	Cappetta per Transfer	IH-TC



OF-ANT


 IH-TC
Opzionale

DIGITALE

Diametro	Descrizione prodotto	Codice
3.5mm	Rotante	OF-ANA



OF-ANA

Diametro	Descrizione prodotto	Codice
3.5mm	Scan Body Narrow con Vite	OF-SBN35



OF-SBN35

SISTEMA ON-FLAT CON ESAGONO ESTERNO

ABUTMENT ON-FLAT CONIC



OFC-A2NR

Altezza	Diametro		Descrizione prodotto	Codice
2mm	4mm	Non rotante	Moncone diritto On Flat con esagono esterno	OFC-A2NR
3mm	4mm	Non rotante	Moncone diritto On Flat con esagono esterno	OFC-A3NR
4mm	4mm	Non rotante	Moncone diritto On Flat con esagono esterno	OFC-A4NR
5mm	4mm	Non rotante	Moncone diritto On Flat con esagono esterno	OFC-A5NR

ABUTMENT CONIC ANGOLATO



OFC-AA25NR

Diametro		Descrizione prodotto	Codice
4mm	Non rotante	Moncone angolato 25° On Flat con esagono esterno - inclusa Vite	OFC-AA25NR

VITI DI GUARIGIONE



OF-HA4025

Altezza	Diametro	Descrizione prodotto	Codice
2.5mm	4mm	Vite di Guarigione per esagono esterno	OF-HA4025

TRANSFER



OF-AT40NR



OF-ALS

Diametro	Descrizione prodotto	Codice
4mm	Transfer Abutment con Vite lunga per esagono esterno	OF-AT40NR
	Vite lunga per Transfer a ricambio	OF-ALS

SISTEMA ON-FLAT CON ESAGONO ESTERNO

CILINDRI ON-FLAT

Diametro		Descrizione prodotto	Codice
4mm	Non rotante	Calcinabile per esagono esterno con Vite di Ritenzione	OF-APCNR

Diametro		Descrizione prodotto	Codice
4mm	Rotante	Calcinabile per esagono esterno con Vite di Ritenzione	OF-APCR



CILINDRI ON-FLAT IN CROMO COBALTO

Diametro		Descrizione prodotto	Codice
4mm	Non rotante	Link in Cromo Cobalto per esagono esterno con Vite di Ritenzione	OF-ACCCNR

Diametro		Descrizione prodotto	Codice
4mm	Rotante	Link in Cromo Cobalto per esagono esterno con Vite di Ritenzione	OF-ACCCR



DIGITALE

Diametro		Descrizione prodotto	Codice
4mm	Non Rotante	Analogo per esagono esterno	OF-AANR

Diametro		Descrizione prodotto	Codice
4mm		Scan Body per esagono esterno con Vite	OF-SBNR



TELESCOPICA CONE LOCK

ABUTMENT DIRITTO H 1,5mm



CL-SA15-4

CL-SA15-6

Altezza	Diametro	Lunghezza	Descrizione prodotto	Codice
1,5mm	3,4mm	4mm	Moncone diritto	CL-SA15-4
1,5mm	3,4mm	6mm	Moncone diritto	CL-SA15-6

ABUTMENT DIRITTO H 2,5mm



CL-SA25-4

CL-SA25-6

Altezza	Diametro	Lunghezza	Descrizione prodotto	Codice
2,5mm	3,4mm	4mm	Moncone diritto	CL-SA25-4
2,5mm	3,4mm	6mm	Moncone diritto	CL-SA25-6

ABUTMENT DIRITTO H 4,0mm



CL-SA40-4

CL-SA40-6

Altezza	Diametro	Lunghezza	Descrizione prodotto	Codice
4,0mm	3,4mm	4mm	Moncone diritto	CL-SA40-4
4,0mm	3,4mm	6mm	Moncone diritto	CL-SA40-6

TELESCOPICA CONE LOCK

ABUTMENT ANGOLATO 7,5° H1,5mm

Altezza	Diametro	Lunghezza	Angolo	Descrizione prodotto	Codice
1,5mm	3,4mm	4mm	7,5°	Moncone angolato con vite	CL-AA7515-4
1,5mm	3,4mm	6mm	7,5°	Moncone angolato con vite	CL-AA7515-6




ABUTMENT ANGOLATO 7,5° H2,5mm

Altezza	Diametro	Lunghezza	Angolo	Descrizione prodotto	Codice
2,5mm	3,4mm	4mm	7,5°	Moncone angolato con vite	CL-AA7525-4
2,5mm	3,4mm	6mm	7,5°	Moncone angolato con vite	CL-AA7525-6



ABUTMENT ANGOLATO 7,5° H4,0mm

Altezza	Diametro	Lunghezza	Angolo	Descrizione prodotto	Codice
4,0mm	3,4mm	4mm	7,5°	Moncone angolato con vite	CL-AA7540-4
4,0mm	3,4mm	6mm	7,5°	Moncone angolato con vite	CL-AA7540-6

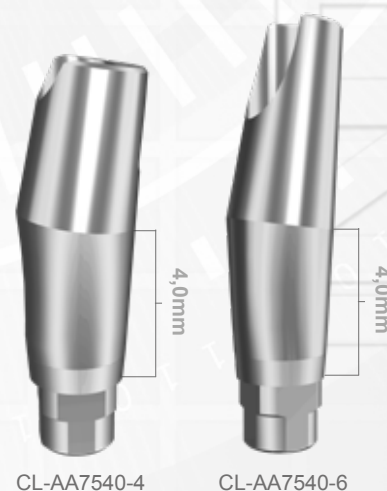

TELESCOPICA CONE LOCK

ABUTMENT ANGOLATO 15° H1,5mm



Altezza	Diametro	Lunghezza	Angolo	Descrizione prodotto	Codice
1,5mm	3,4mm	4mm	15°	Moncone angolato con vite	CL-AA1515-4
1,5mm	3,4mm	6mm	15°	Moncone angolato con vite	CL-AA1515-6

ABUTMENT ANGOLATO 15° H2,5mm



Altezza	Diametro	Lunghezza	Angolo	Descrizione prodotto	Codice
2,5mm	3,4mm	4mm	15°	Moncone angolato con vite	CL-AA1525-4
2,5mm	3,4mm	6mm	15°	Moncone angolato con vite	CL-AA1525-6

ABUTMENT ANGOLATO 15° H4,0mm



Altezza	Diametro	Lunghezza	Angolo	Descrizione prodotto	Codice
4,0mm	3,4mm	4mm	15°	Moncone angolato con vite	CL-AA1540-4
4,0mm	3,4mm	6mm	15°	Moncone angolato con vite	CL-AA1540-6

TELESCOPICA CONE LOCK

ABUTMENT ANGOLATO 22° H1,5mm

Altezza	Diametro	Lunghezza	Angolo	Descrizione prodotto	Codice
1,5mm	3,4mm	4mm	22°	Moncone angolato con vite	CL-AA2215-4
1,5mm	3,4mm	6mm	22°	Moncone angolato con vite	CL-AA2215-6



ABUTMENT ANGOLATO 22° H2,5mm

Altezza	Diametro	Lunghezza	Angolo	Descrizione prodotto	Codice
2,5mm	3,4mm	4mm	22°	Moncone angolato con vite	CL-AA2225-4
2,5mm	3,4mm	6mm	22°	Moncone angolato con vite	CL-AA2225-6



ABUTMENT ANGOLATO 22° H4,0mm

Altezza	Diametro	Lunghezza	Angolo	Descrizione prodotto	Codice
4,0mm	3,4mm	4mm	22°	Moncone angolato con vite	CL-AA2240-4
4,0mm	3,4mm	6mm	22°	Moncone angolato con vite	CL-AA2240-6



TELESCOPICA CONE LOCK

SCANBODY/TRANSFER CONE LOCK



CL-SB-4



CL-SB-6

Diametro	Lunghezza	Descrizione prodotto	Codice
3,4mm	4mm	Scan Body / Transfer con vite	CL-SB-4
3,4mm	6mm	Scan Body / Transfer con vite	CL-SB-6

ANALOGO CONE LOCK



CL-DA-4



CL-DA-6

Diametro	Lunghezza	Descrizione prodotto	Codice
3,4mm	4mm	Analogo con vite	CL-DA-4
3,4mm	6mm	Analogo con vite	CL-DA-6

PARALLELIZZATORE PER ABUTMENT



CL-AAP-4



CL-AAP-6

Diametro	Lunghezza	Descrizione prodotto	Codice
3,4mm	4mm	Parallelizzatore per abutment	CL-AAP-4
3,4mm	6mm	Parallelizzatore per abutment	CL-AAP-6

CAPPETTA IN TITANIO



CL-TCR-4



CL-TCR-6

Diametro	Lunghezza		Descrizione prodotto	Codice
3,4mm	4mm	Rotante	Cappetta Conica in Titanio	CL-TCR-4
3,4mm	6mm	Rotante	Cappetta Conica in Titanio	CL-TCR-6



CL-TCNR-4



CL-TCNR-6

Diametro	Lunghezza		Descrizione prodotto	Codice
3,4mm	4mm	Non Rotante	Cappetta Conica in Titanio	CL-TCNR-4
3,4mm	6mm	Non Rotante	Cappetta Conica in Titanio	CL-TCNR-6

VITI PROTESICHE

VITI RITENZIONE

Descrizione prodotto

Vite Ritenzione clinica per Conic e Standard

Codice
S-CS


S-CS

Descrizione prodotto

Vite Ritenzione clinica per On-Flat

Codice
OF-AFRS


OF-AFRS



M-ARS



M-AS

Descrizione prodotto

Vite Clinica per Cilindri e scanbody MUA

Codice
M-ARS

Vite per Abutment MUA

M-AS

VITI PER INNESTO ANGOLATO

Descrizione prodotto

 Driver per Vite a innesto angolato
 (compatibile con Cricchetto 4x4mm)

Codice
ELBD

Driver a contrangolo per Vite a innesto angolato

ELBDCA


ELBD



ELBDCA

Descrizione prodotto

 Vite di Ritenzione Clinica con innesto angolato
 per Conic CT e Internal Hex

Codice
ASCA

Vite di Ritenzione Clinica con innesto angolato per On-Flat

OF-ASCA

 Vite di Ritenzione Clinica con innesto angolato
 per MUA

M-ASCA


ASCA



OF-ASCA

BONE PROFILER

Descrizione prodotto

Bone Profiler Contrangolo Standard

Codice
BP-CAS

Vite Guida per linea Conic CT

BP-CG


BP-CAS



BP-CG

I Bone Profilers di Intra-Lock sono progettati per la rimozione manuale dell'osso crestale che potrebbe crescere intorno alla piattaforma dell'impianto durante la fase di guarigione.

I Bone Profilers vengono posizionati correttamente grazie all'utilizzo delle corrispondenti viti di allineamento, permettendo così la rimozione di tutto l'osso in eccesso senza modificare la precisione della superficie implantare. Questa procedura assicura un accurato posizionamento dei componenti restaurative.

STRUMENTI

DRIVERS



C-ELRL



C-ELRS



C-ELCAL



C-ELCAS

Descrizione prodotto**Codice**

Chiave di montaggio lunga per Cricchetto

C-ELRL

Chiave di montaggio corta per Cricchetto

C-ELRS

Chiave di montaggio lunga per Contrangolo

C-ELCAL

Chiave di montaggio corta per Contrangolo

C-ELCAS

Questi Drivers consentono al clinico di prelevare l'impianto direttamente dalla confezione sterile e trasportarlo al sito osteotomico. Avvitare fino a 35 Ncm con Driver a Contrangolo mentre a Cricchetto non superare i 60 Ncm.

IMPLANT SURGICAL DRIVER

**Descrizione prodotto****Codice**

Implant Surgical Driver

ELISD

CRICCHETTO



SRW



UNACR4

Descrizione prodotto**Codice**

Cricchetto Chirurgico

SRW

Adattatore connessione Standard 4x4mm

UNACR4

CHIAVE DINAMOMETRICA



CTL-1040

Descrizione prodotto**Codice**

Chiave Dinamometrica 10-40 Ncm

CTL-1040

Il design in titanio leggero è facile da usare come chiave dinamometrica regolabile o cricchetto. Si smonta rapidamente per la pulizia. Nessuna calibrazione richiesta. Venduto con adattatore standard 4x4

STRUMENTI

ON-FLAT CONTRANGOLO

Descrizione prodotto

Driver a Contrangolo On-Flat Ø 1.65mm

Codice
OF-ACAD


OF-ACAD

DRIVER A CONTRANGOLO

Descrizione prodotto

Driver a Contrangolo Corto Ø 1.27mm

Codice
EDCADS

Driver a Contrangolo Lungo Ø 1.27mm

EDCADL


EDCADS



EDCADL

DRIVERS PER CHIAVE DINAMOMETRICA

Descrizione prodotto

Drivers Lungo On-Flat per Cricchetto dinamometrico Ø 1.65mm

Codice
ELD16L

Drivers Corto On-Flat per Cricchetto dinamometrico Ø 1.65mm

ELD16S


ELD16L



ELD16S



ELDL



ELDS

Descrizione prodotto

Drivers Lungo per Cricchetto dinamometrico Ø 1.27mm

Codice
ELDL

Drivers Corto per Cricchetto dinamometrico Ø 1.27mm

ELDS

DRIVERS A CONTRANGOLO E CACCIAVITI

Descrizione prodotto

Cacciavite Lungo - Ø 1.27mm

Codice
EDL

Cacciavite Corto - Ø 1.27mm

EDC


EDL



EDC



C-EXTRL



DE

Descrizione prodotto

Estrattore Lungo per Vite Clinica S-CS

Codice
C-EXTRL

Estrattore Corto per Vite Clinica S-CS

C-EXTRL-S

Prolunga per fresa

DE

STRUMENTI

PIN DI PARALLELISMO



PP2

Descrizione prodotto

Pin di Parallelismo

Codice

PP2

BISTURI CIRCOLARE



RPCA3

Descrizione prodotto

Bisturi circolare a Contrangolo Ø 3mm

Codice

RPCA3

FRESE PER SPALLA



CS-34

Descrizione prodotto

Countersink Ø 3.4mm

Countersink Ø 4mm

Countersink Ø 4.75mm

Countersink Ø 3.6mm

Countersink Ø 3,8mm

Countersink Ø 4.4mm

Codice

CS-34

CS-40

CS-475

CS-375P

CS-40P

CS-475P

DRIVER MUA DIRITTO



EDMSRA



EDMSCA



EDMS

Descrizione prodotto

Easy Driver C/A per Mua Diritto

Easy Driver adattatore 4x4 per Mua Diritto

Easy Driver Cacciavite per Mua Diritto

Codice

EDMSCA

EDMSRA

EDMS



EDMTI

Easy Driver Posizionatore per Mua Angolato

EDMTI

STRUMENTI PER IN-LOC



IL-IN



IL-CAD



IL-DM

Descrizione prodotto

Inseritore per Nylon In-Loc

Driver Contrangolo per In-Loc

Driver Manuale per In-Loc

Codice

IL-IN

IL-CAD

IL-DM

FRESE

FRESE E STOP

Descrizione prodotto

Fresa Pilota **LD**

Descrizione prodotto

Descrizione prodotto	Codice
Fresa Ø 2.2 x 16mm	D22
Fresa Ø 2.5 x 15mm	D25
Fresa Ø 2.8 x 15mm	D28
Fresa Ø 3.2 x 15mm	D32
Fresa Ø 3.6 x 15mm	D36
Fresa Ø 3.8 x 15mm	D38
Fresa Ø 4.2 x 15mm	D42



Descrizione prodotto

Descrizione prodotto	Codice
Fresa Conica Finale 3.75mm	DCT375
Fresa Conica Finale 4.00mm	DCT40
Fresa Conica Finale 4.75mm	DCT475



Descrizione prodotto

Descrizione prodotto	Codice
Stop per Fresa, 6.5mm	DS-065
Stop per Fresa, 7mm	DS-07
Stop per Fresa, 8mm	DS-08
Stop per Fresa, 9mm	DS-09
Stop per Fresa, 10mm	DS-10
Stop per Fresa, 11.5mm	DS-115
Stop per Fresa, 12mm	DS-12
Stop per Fresa, 13mm	DS-13
Stop per Fresa, 14mm	DS-14
Stop per Fresa, 15mm	DS-15



DS-10

KIT CHIRURGICO

KIT CHIRURGICO

Descrizione prodotto

Kit Chirurgico Vuoto

Codice


SKILK




PASSAGGI DI FRESA: VELOCITA' FRESAGGIO

DIAMETRO FRESA	RPM (GIRI AL MINUTO)
1,5mm - 2,2mm	800 -1000 GIRI AL MINUTO
2,5mm - 2,8mm	150 -300 GIRI AL MINUTO
3,2mm - 3,6mm - 3,8mm - 4,2mm	80 -130 GIRI AL MINUTO
DCT 3,75 - DCT 4,00 - DCT 4,75	80 -130 GIRI AL MINUTO

PASSAGGI DI FRESA: Impianti a Corpo Cilindrico

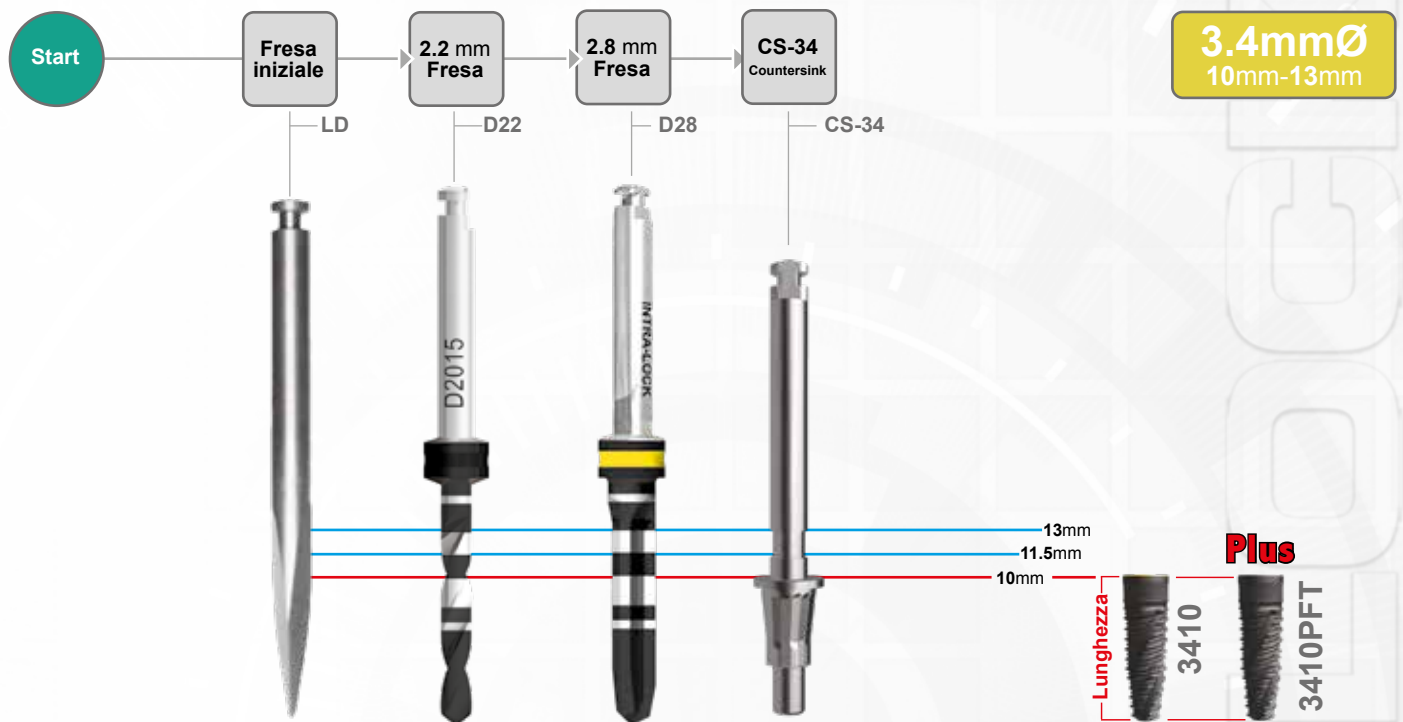


In **OSSO D3-D4** usare le frese fino a D22 e usare la Countersink in presenza di corticale dura.

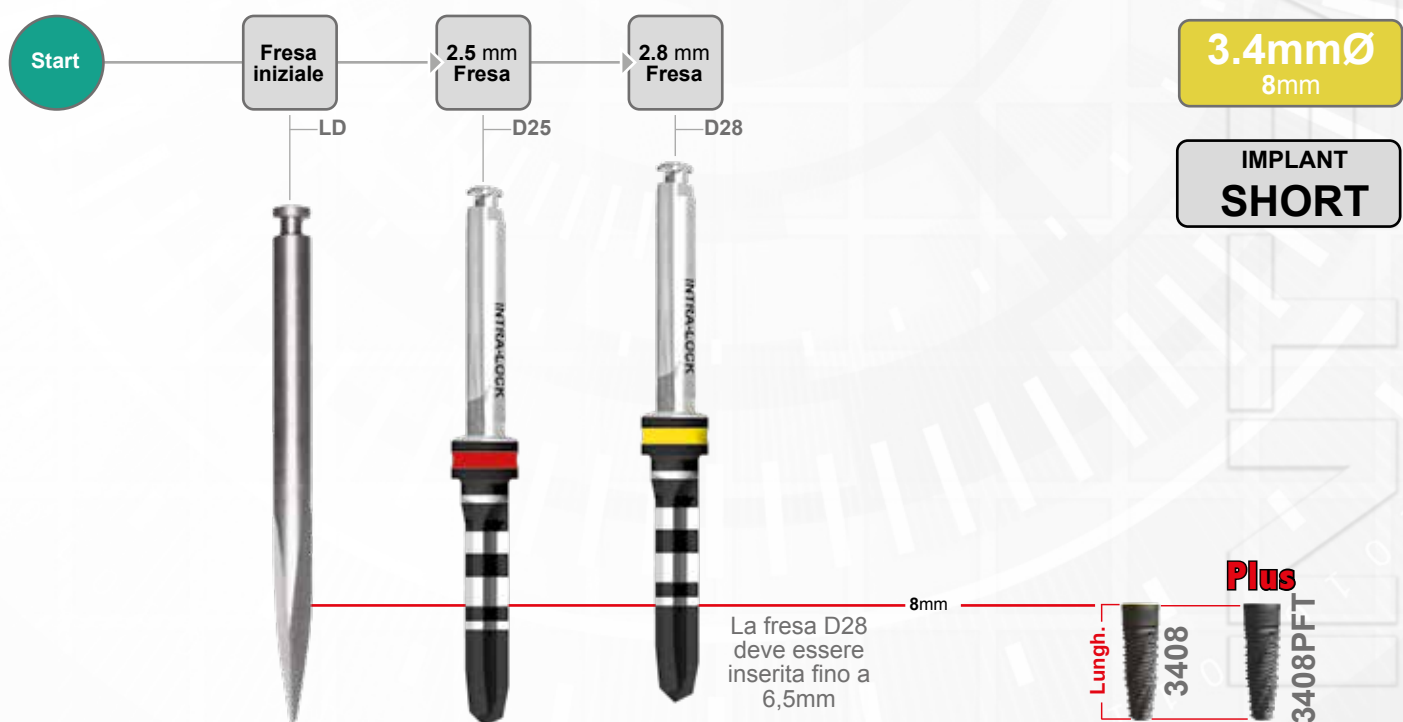


In **OSSO D3-D4** usare le frese fino a D25.


PASSAGGI DI FRESA: Impianti a Corpo Cilindrico

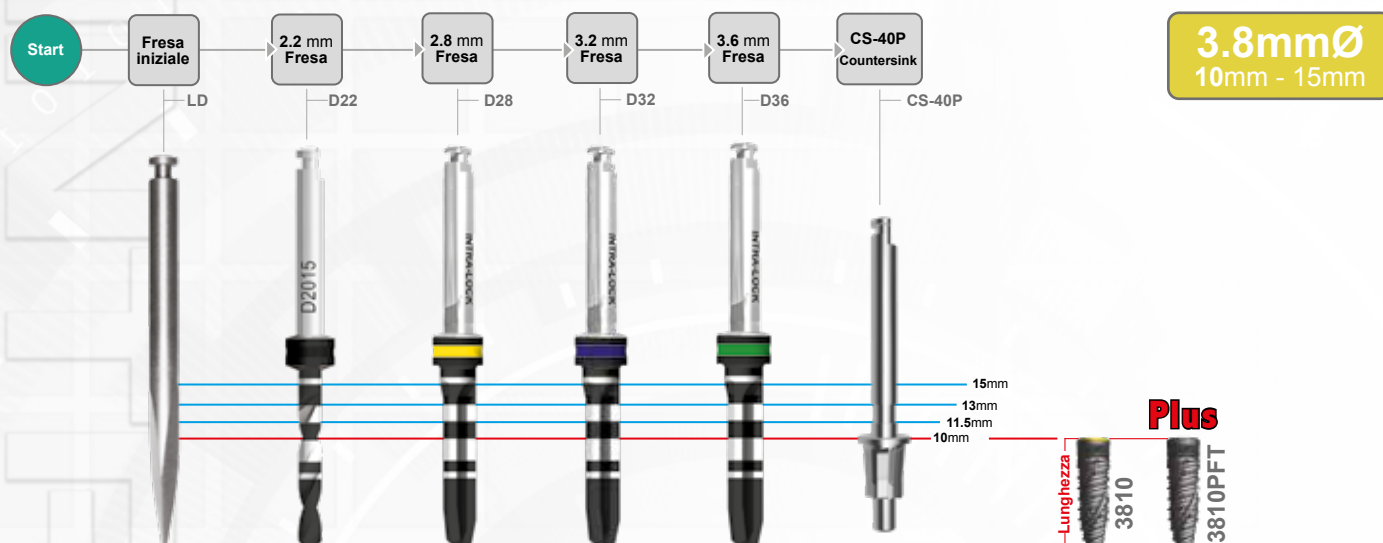

In **OSSO D3-D4** usare le frese fino a D32 e usare la Countersink in presenza di corticale dura.

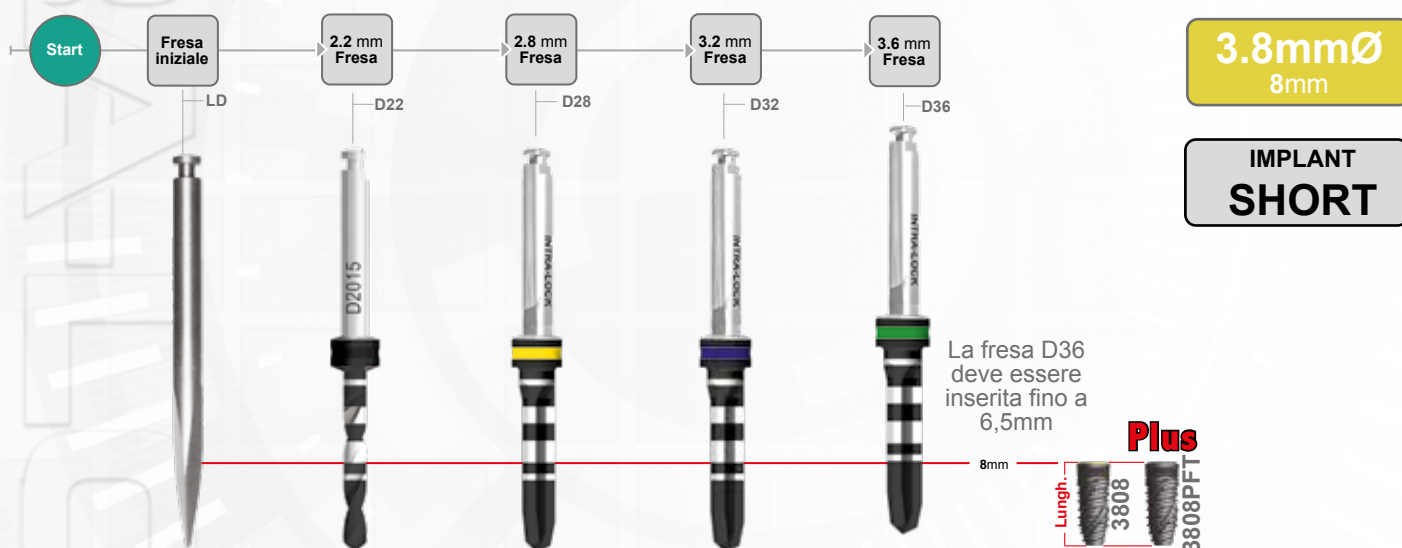


In **OSSO D3-D4** usare le frese fino a D32

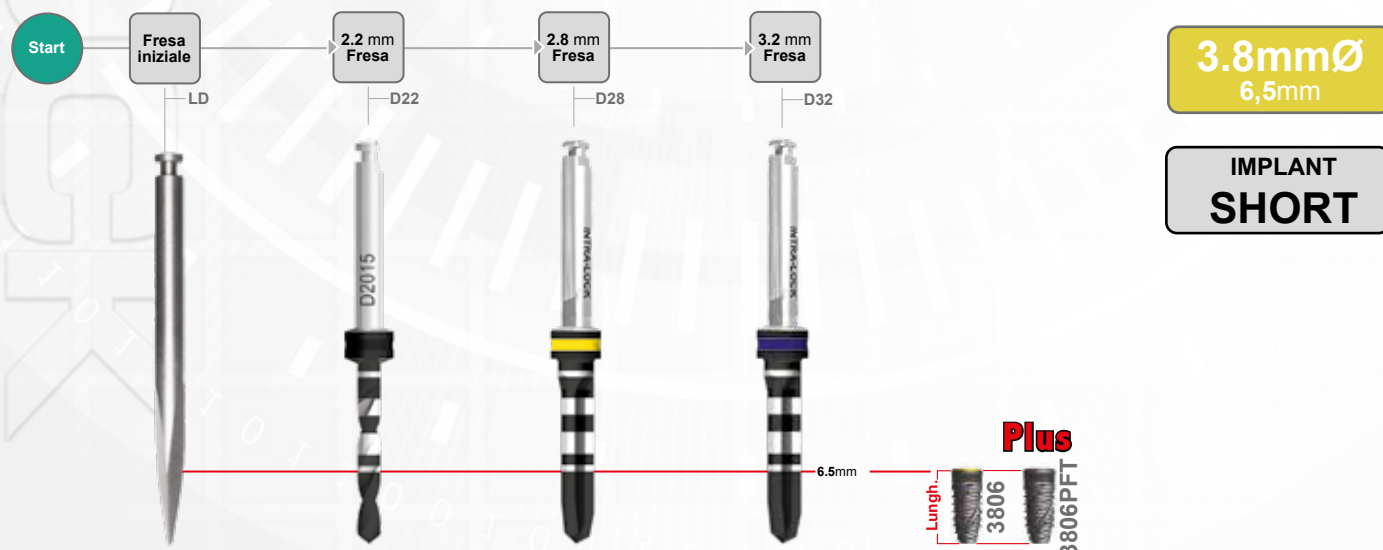


In **OSSO D3-D4** usare le frese fino a D28

PASSAGGI DI FRESA: Impianti a Corpo Cilindrico

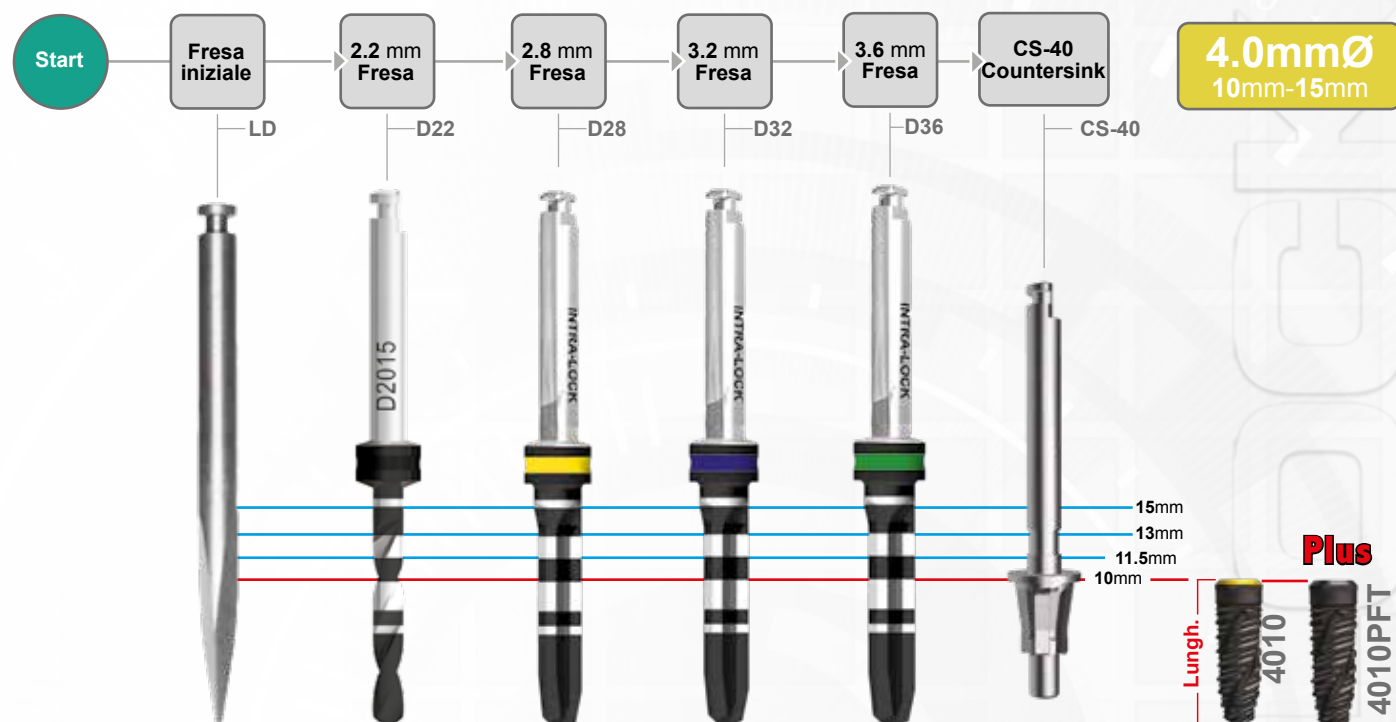


In **OSSO D3-D4** usare le frese fino a D32 e usare la Countersink in presenza di corticale dura.

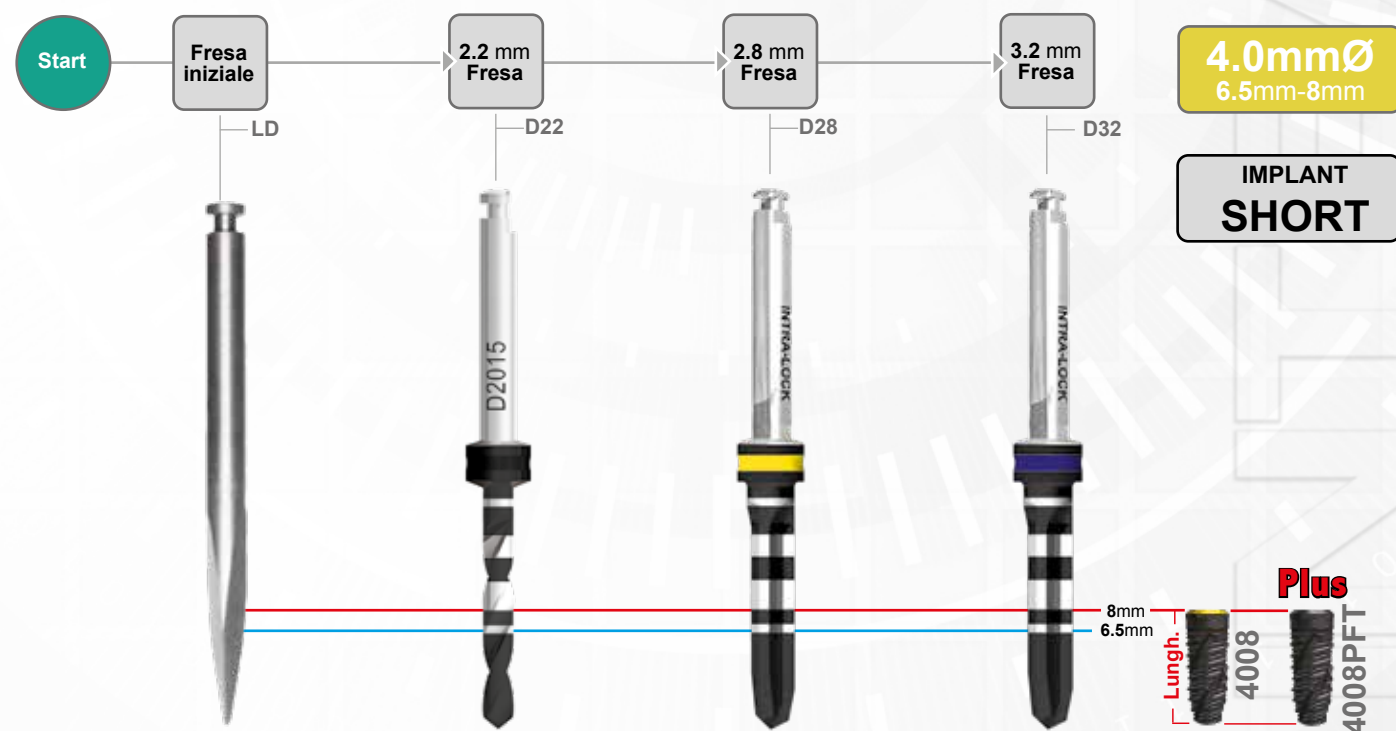


In **OSSO D3-D4** sottofresare

PASSAGGI DI FRESA: Impianti a Corpo Cilindrico

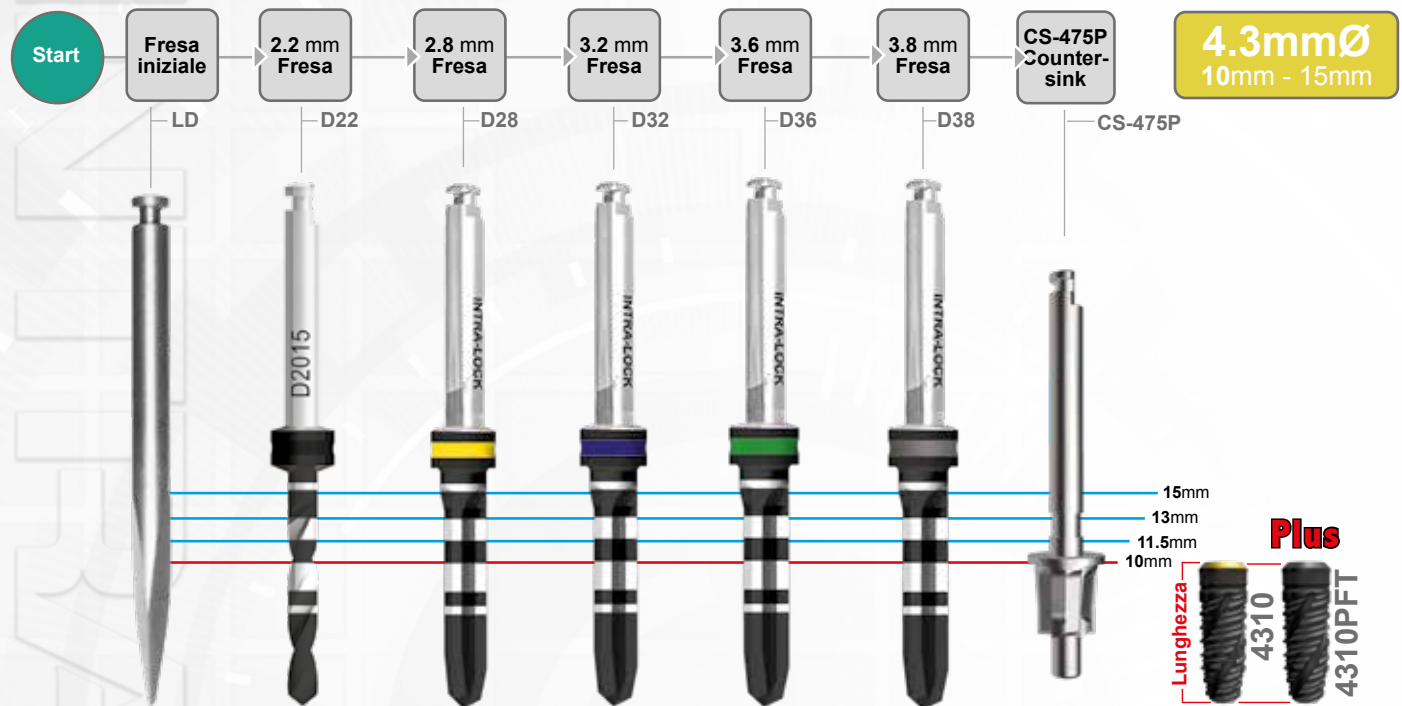


In **OSSO D3-D4** usare le frese fino a D32 e usare la Countersink in presenza di corticale dura.

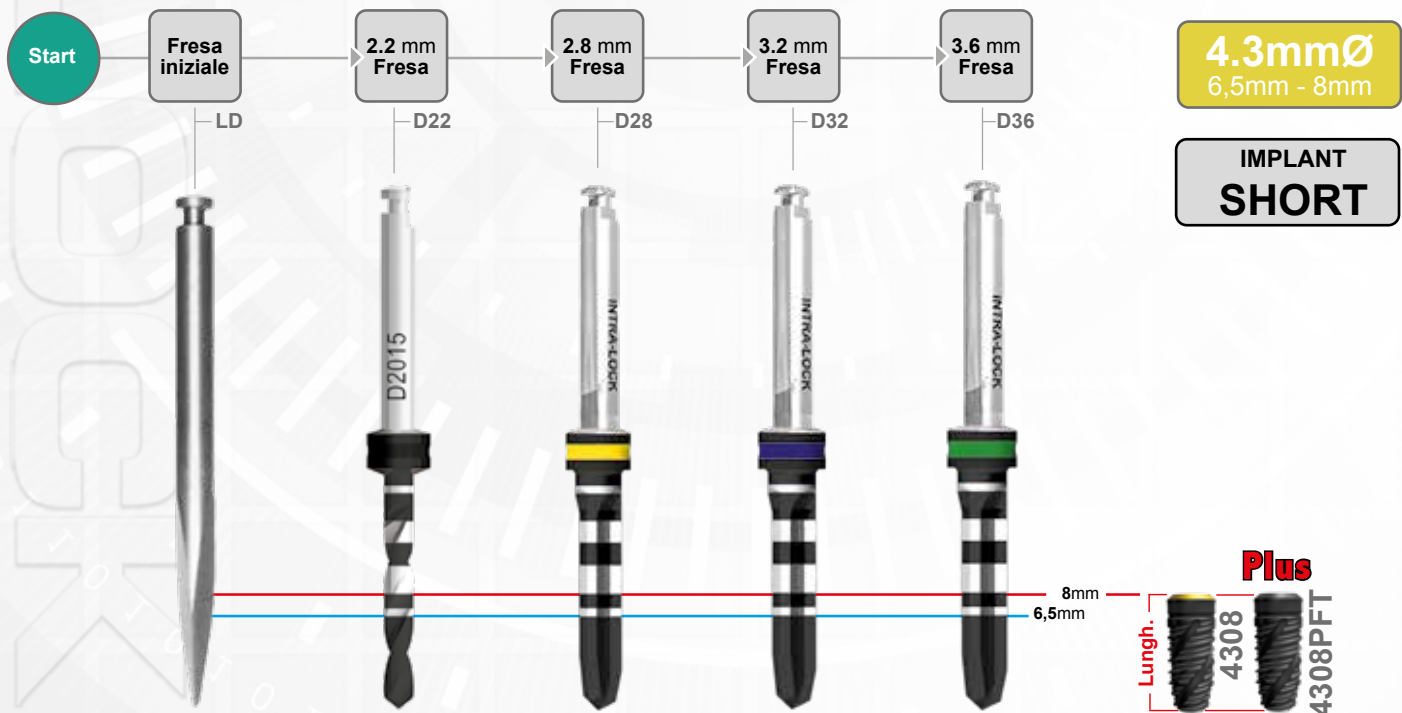


In **OSSO D3-D4** sottofresare

PASSAGGI DI FRESA: Impianti a Corpo Conico CT

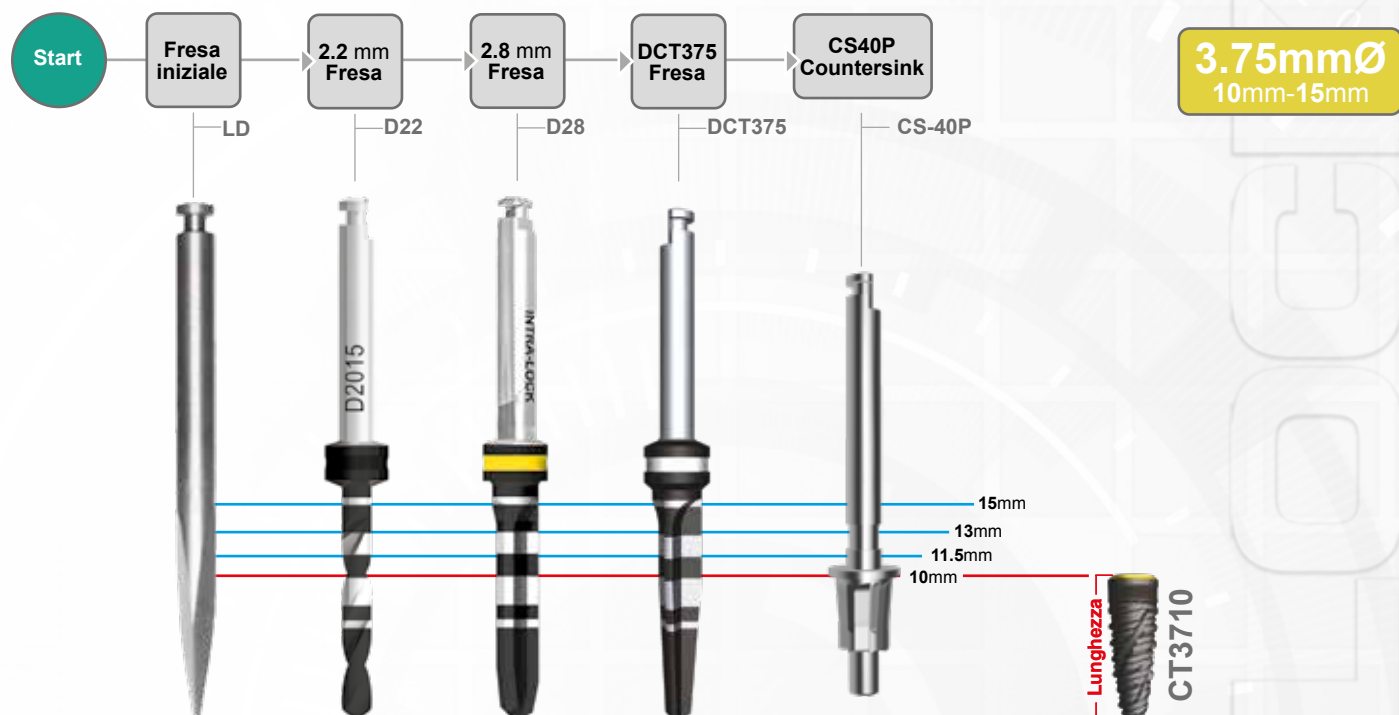


In **OSSO D3-D4** usare le frese fino a D28

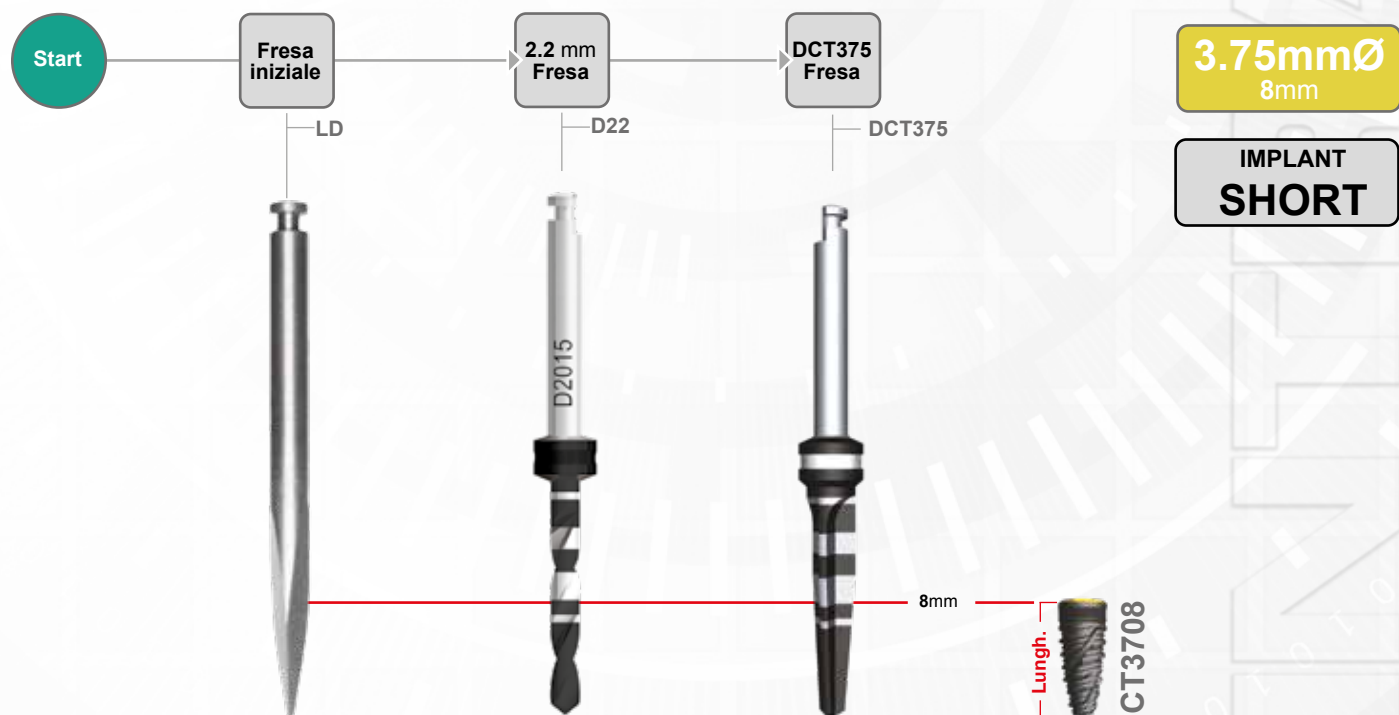


In **OSSO D3-D4** usare le frese fino a D22

PASSAGGI DI FRESA: Impianti a Corpo Conico CT

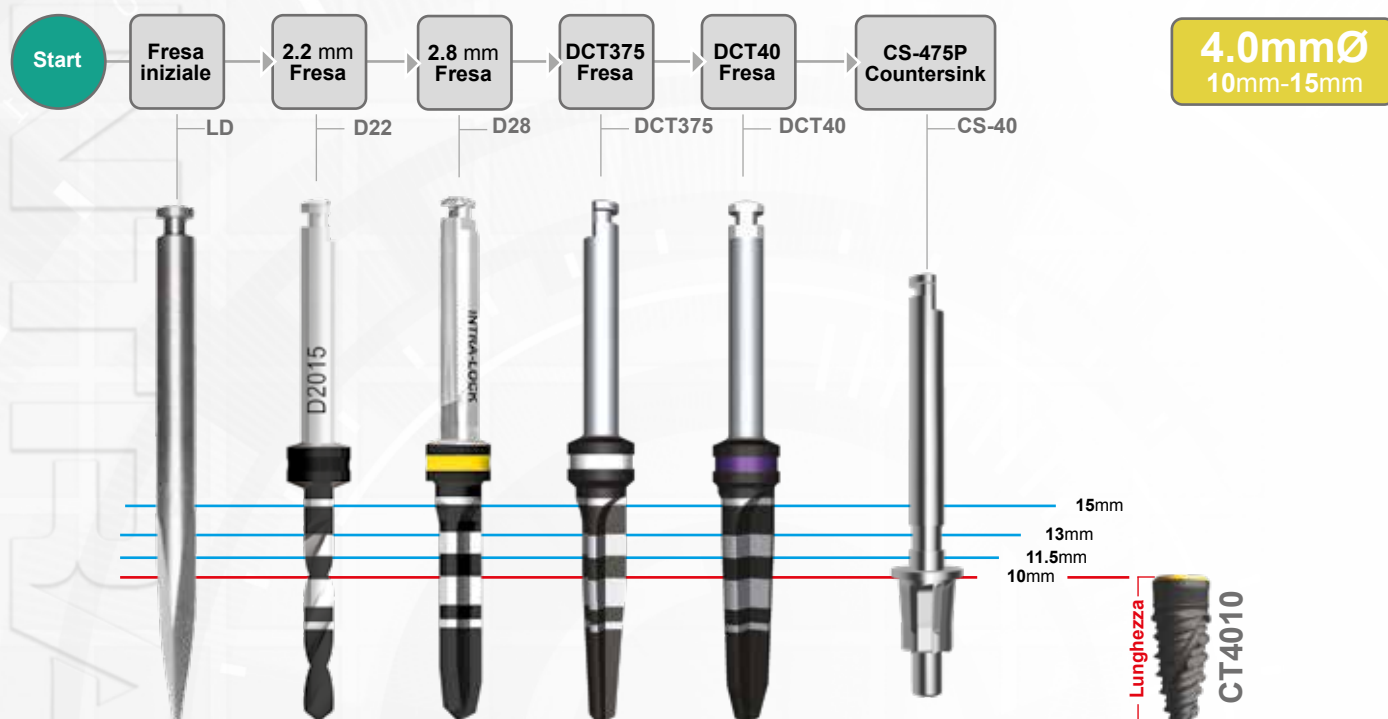


In OSSO D3-D4 usare le frese fino a D22

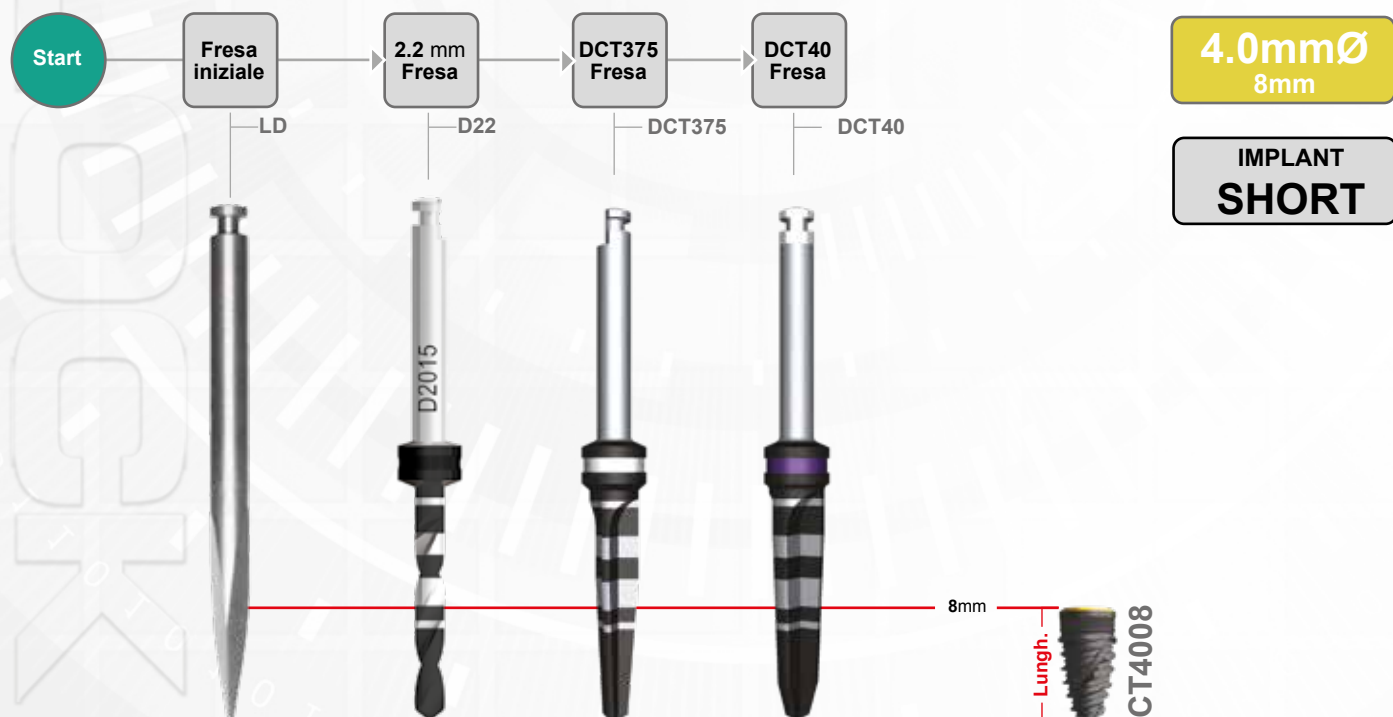

In OSSO D3-D4 usare le frese fino a D22

PASSAGGI DI FRESA: Impianti a Corpo Conico CT

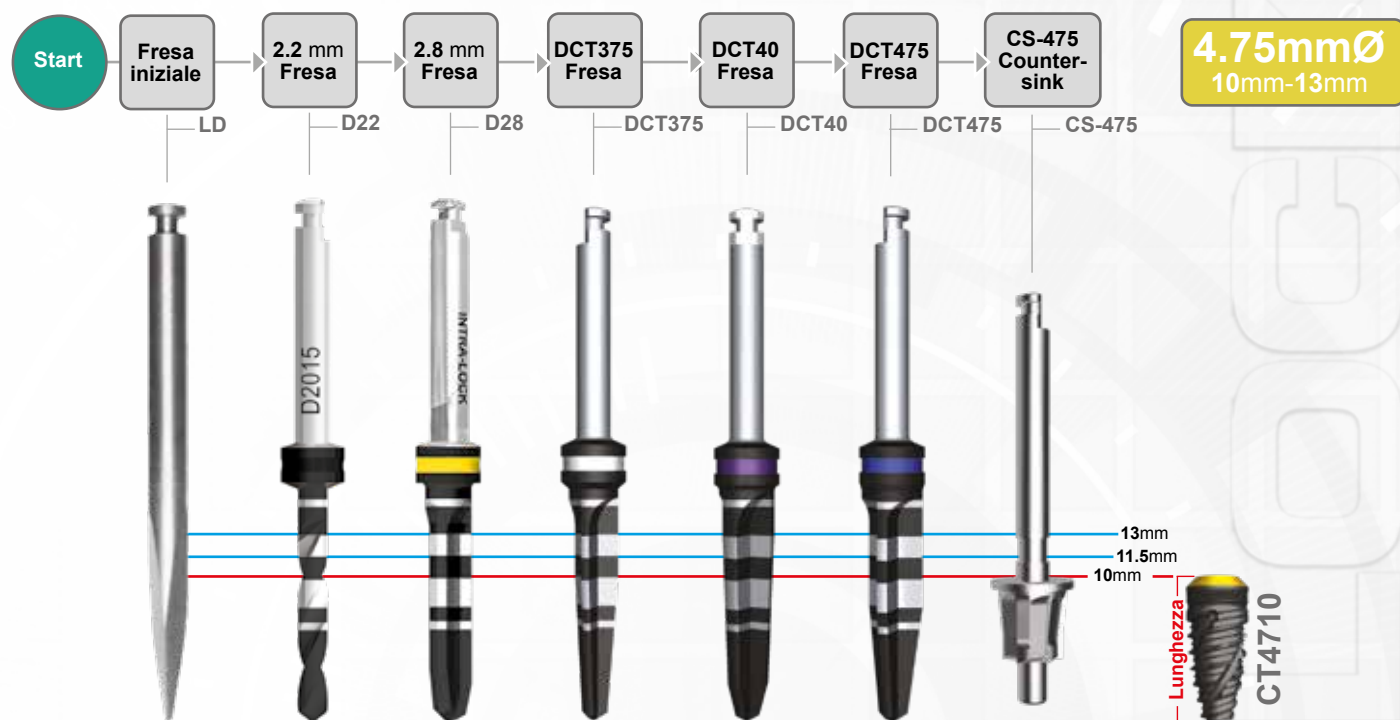

In **OSSO D3-D4** usare le frese fino a DCT375



In **OSSO D3-D4** usare le frese fino a DCT375

PASSAGGI DI FRESA: Impianti a Corpo Conico **PRO**

CONICT **PRO**


e **PRO Plus**

Linea Conic CT **PRO**


Nuova Linea Conic CT **PRO Plus**




PASSAGGI DI FRESA: Impianti a Corpo Conico **PRO** e **PRO Plus**

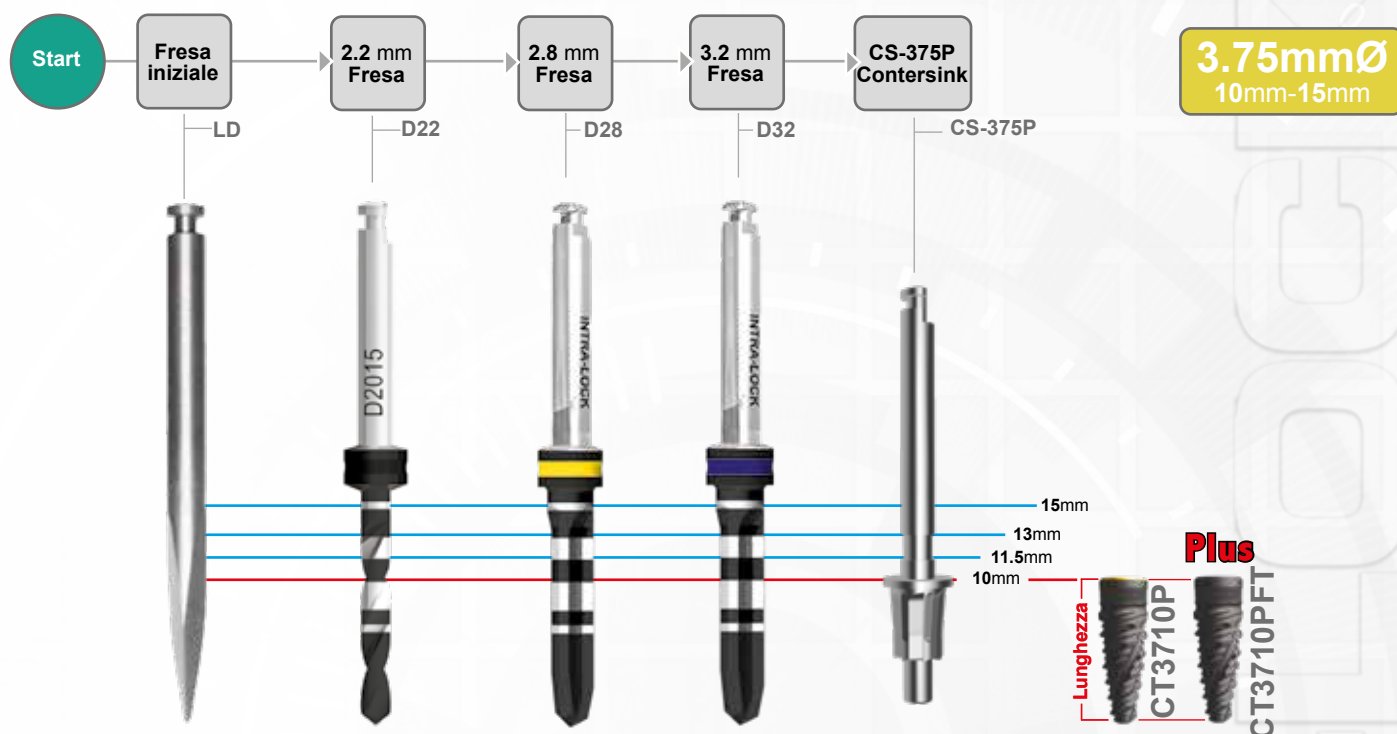


In **OSSO D3-D4** usare le frese fino a D22 e usare la Countersink in presenza di corticale dura.

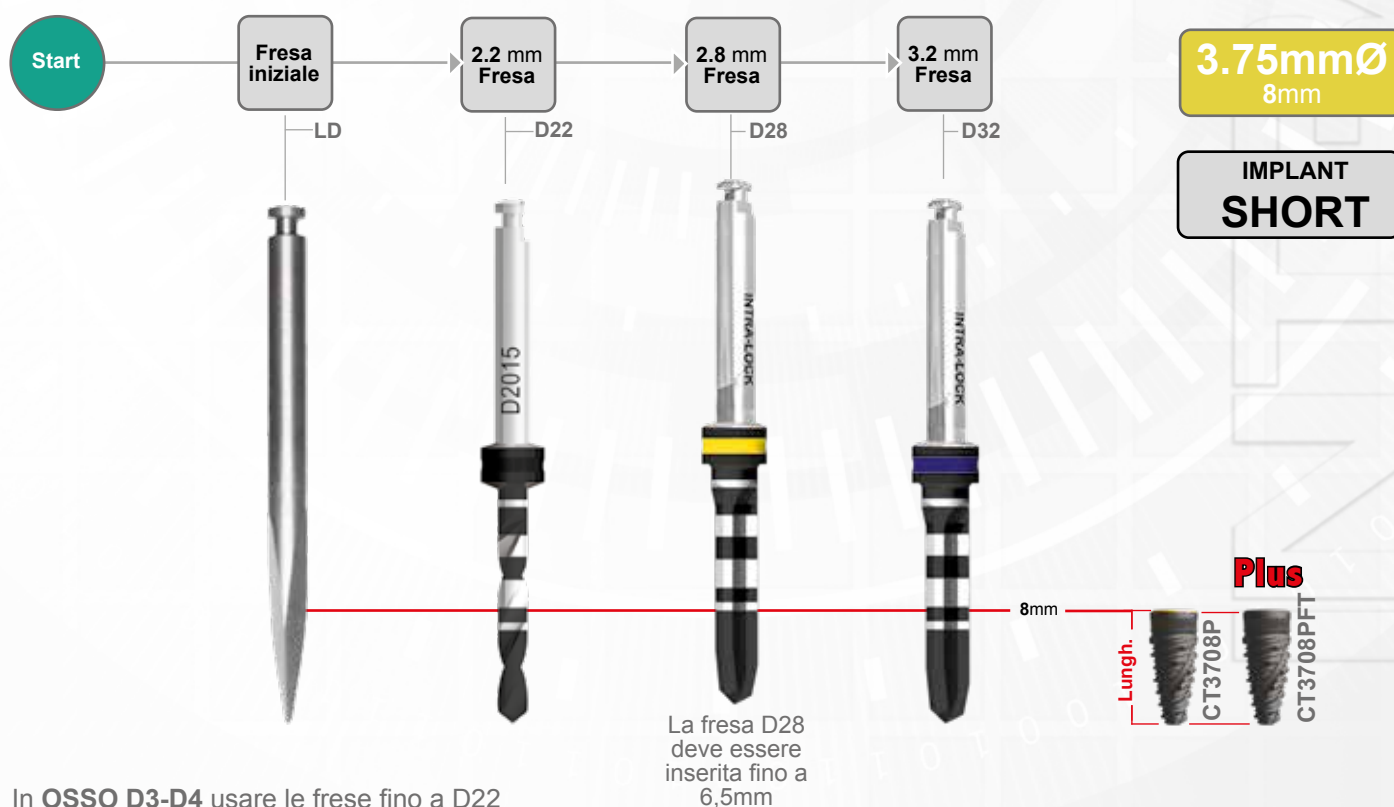

In **OSSO D3-D4** usare le frese fino a D22

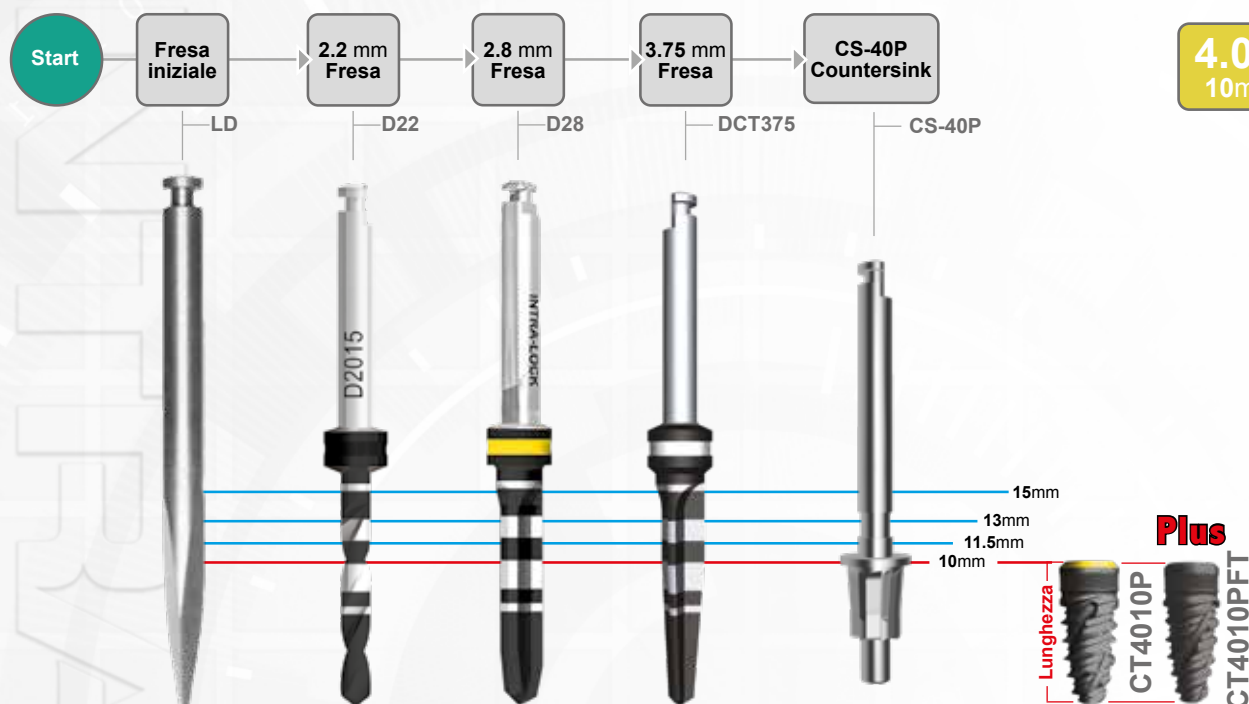
PASSAGGI DI FRESA: Impianti a Corpo Conico **PRO**e **PRO Plus****4.00mmØ**
10mm - 15mm

In **OSSO D3-D4** usare le frese fino a D22 e usare la Countersink in presenza di corticale dura.

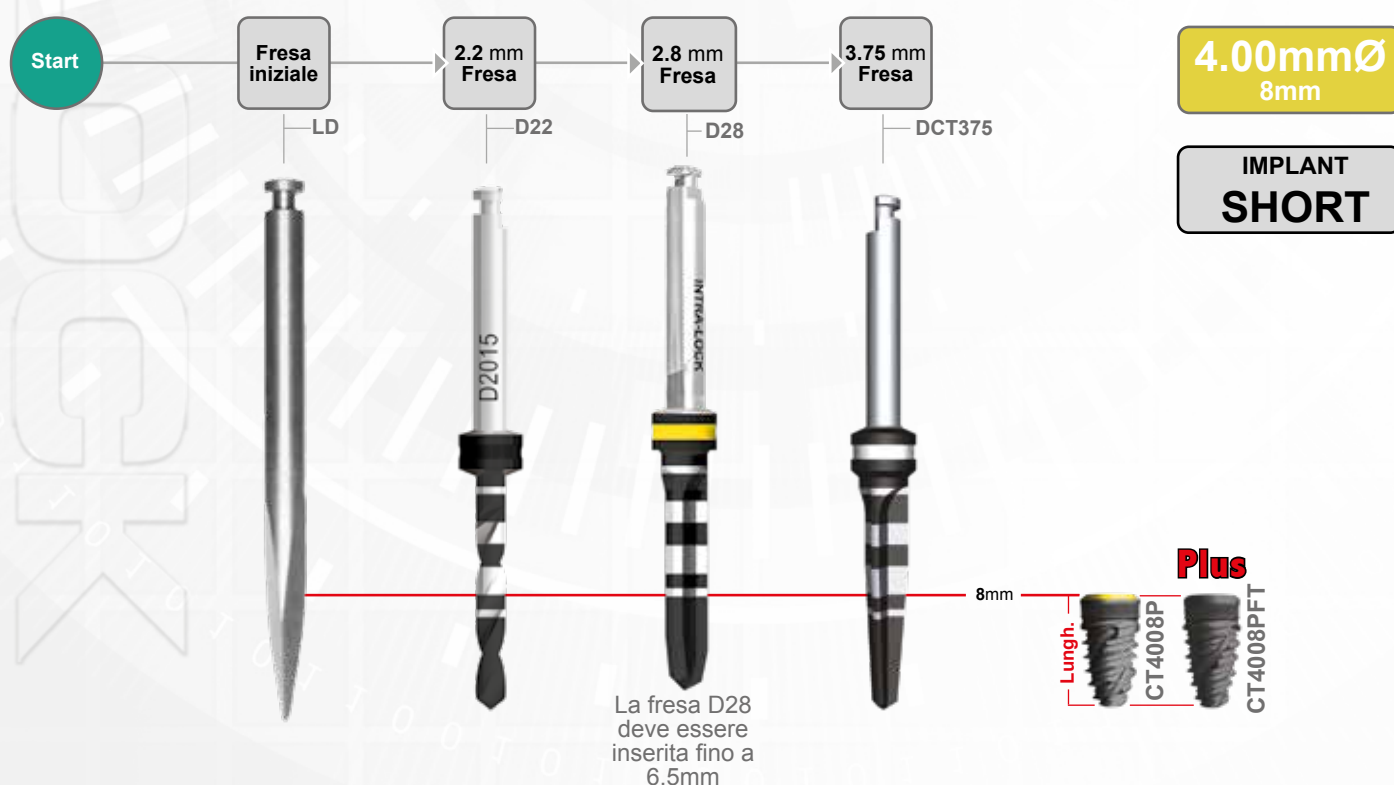


In **OSSO D3-D4** usare le frese fino a D22 e usare la Countersink in presenza di corticale dura.

PASSAGGI DI FRESA: Impianti a Corpo Conico **PRO** e **PRO Plus**

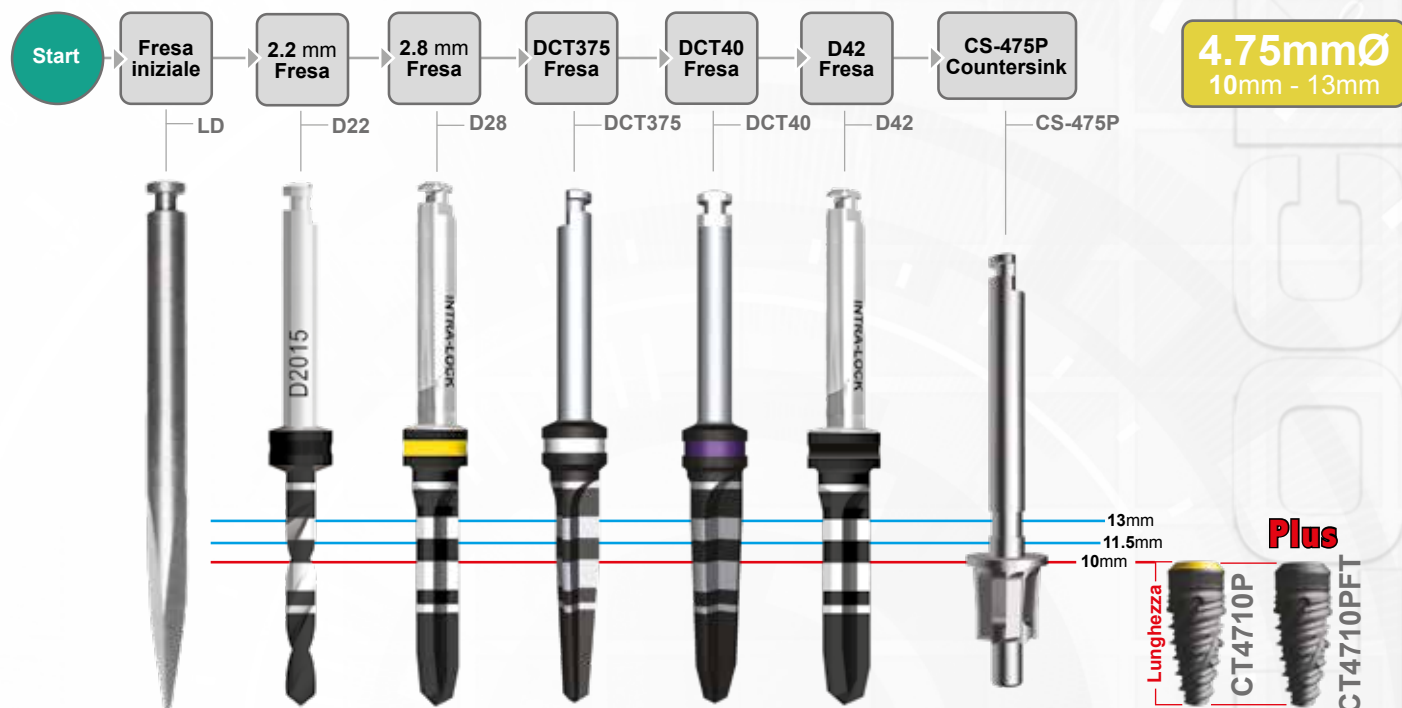

In **OSSO D3-D4** usare le frese fino a DCT40

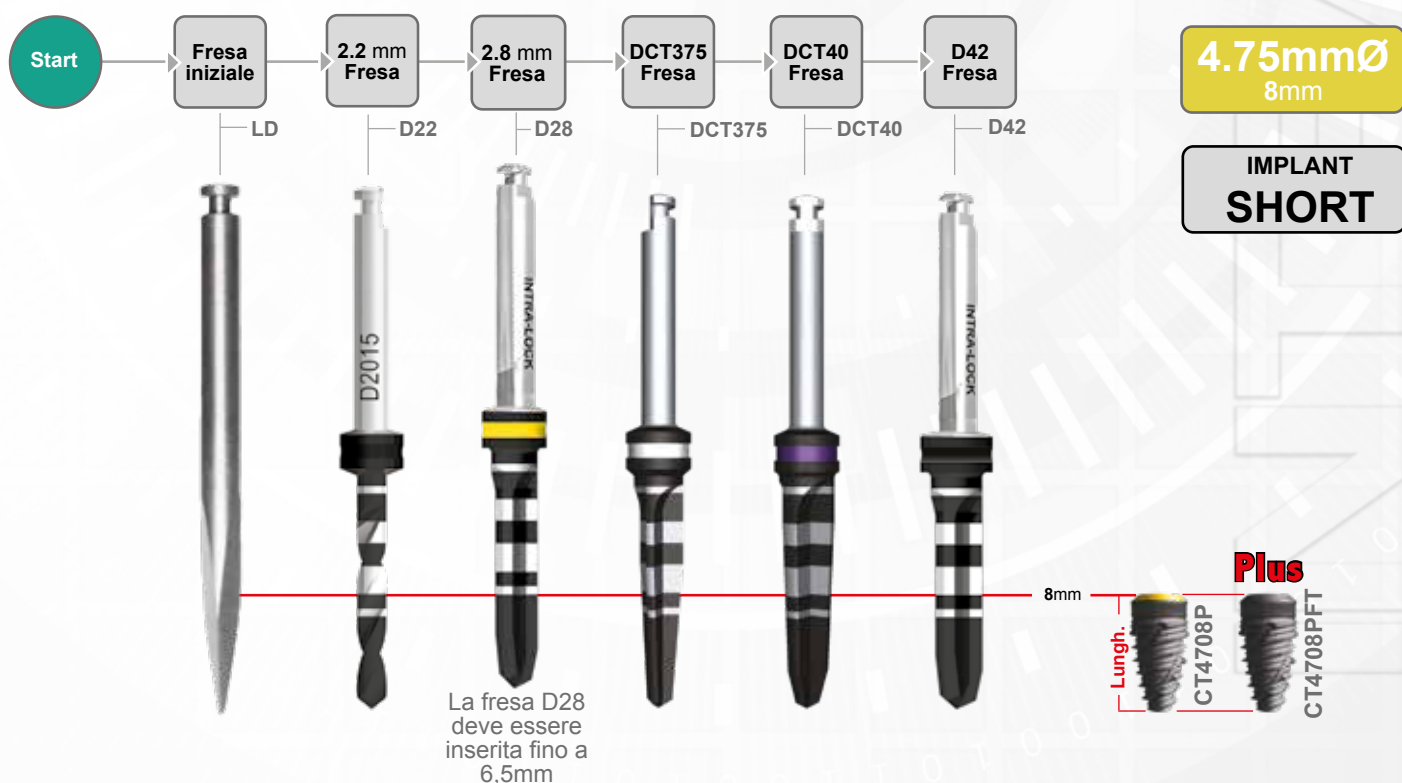

In **OSSO D3-D4** usare le frese fino a DCT375



INTRA-LOCK®
SYSTEM EUROPE



Intra-Lock System Europa S.r.l.®

Via Ottavio Bottigliero, 1

Tel. +39 089 233045

84126 Salerno (SA) - Italy

info@intra-lock.it - www.intra-lock.it

